



## Intrafix® Safeset

### EQUIPO DE INFUSIÓN INTRAVENOSA CON SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN POR GRAVEDAD.

- Punzón de plástico rígido bicanal, transparente. Con tapón protector. Toma de aire con filtro antibacteriano y sistema de cierre (tapa). De acuerdo a normas ISO 8536-4.
- Cámara de goteo con parte superior rígida y muy transparente para control de flujo y parte inferior flexible. Filtro de partículas de 15 µm, situado en la base de la cámara.
- Sistema de seguridad Air-Stop, tecnología aplicada a través de un filtro especialmente diseñado y situado en la base de la cámara de goteo para evitar la entrada de aire en el tubo en caso de vaciado total del contenedor de la solución de infusión.
- Regulación de goteo conforme a normas DIN (20 gotas = 1 ml ± 0,1 ml agua destilada). Rodillo-Regulador del goteo de gran precisión. Su diseño facilita al usuario el establecimiento requerido de la velocidad de infusión, consiguiendo una máxima estabilidad del flujo durante el tiempo de la infusión. Rueda de desplazamiento suave con identificación táctil de la posición cerrada. Con ranura especial que protege el punzón al retirarlo de la botella, evitando pinchazos accidentales y el contacto con el tubo. Enclave ranura para sostener el tubo durante su utilización.
- Tubo: 3 mm diámetro interno; 4,1 mm diámetro externo. Longitud 180 cm.
- Material PVC, Exento de DEHP y látex.
- Conexión Luer-Lock, con sistema de seguridad Prime Stop, a través de la tecnología aplicada en su tapón hidrófobo que permite el cebado de la línea automáticamente. Evita la salida de solución al llegar al extremo distal de la línea, eliminando molestos goteos y minimizando posibles contaminaciones y/o proliferación bacteriana de la conexión al paciente. Permite administrar la dosis completa al paciente sin riesgo de pérdidas por goteo.
- Compatible con citoestáticos, lípidos y desinfectantes habituales.

## DATOS PRODUCTO

- Unidad de venta: c/100 unidades
- Envase unitario estéril de fácil apertura
- Caducidad: 5 años
- Código: 4063000
- Envase con completa información del producto y con una fácil identificación de cada modelo.
- Método de esterilización: R. Gamma

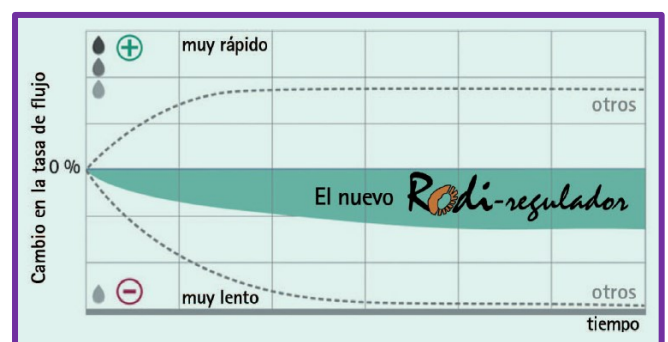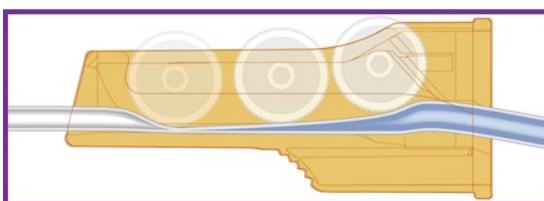

BBraun Medical | Hospital Basic Care | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)  
Tel. 93 586 62 00\* | Fax 93 588 10 96 | [www.bbraun.es](http://www.bbraun.es)