

EVITA BURBUJAS
Y FUGAS

Seguridad B. Braun VetCare

Líneas de infusión SafeSet

HAZ FRENTE A LOS RETOS DEL DÍA A DÍA


En la actividad clínica se presentan actividades que, aún siendo rutinarias, no dejan de entrañar riesgos para el paciente, por lo que deben maximizarse las precauciones.

En la terapia de infusión, una actuación responsable se caracteriza por la reducción o desaparición de riesgos tales como embolismos, infusiones de partículas, flebitis, etc.

En B. Braun somos especialistas en terapias de infusión. Desde que fabricamos el primer equipo, hace ya más de 50 años, hemos desarrollado continuamente nuevos productos, materiales y componentes con un único denominador común: la seguridad del paciente y la comodidad para el profesional sanitario.

B. Braun infunde seguridad

El equipo de infusión Intrafix® SafeSet incluye los siguientes sistemas de seguridad:

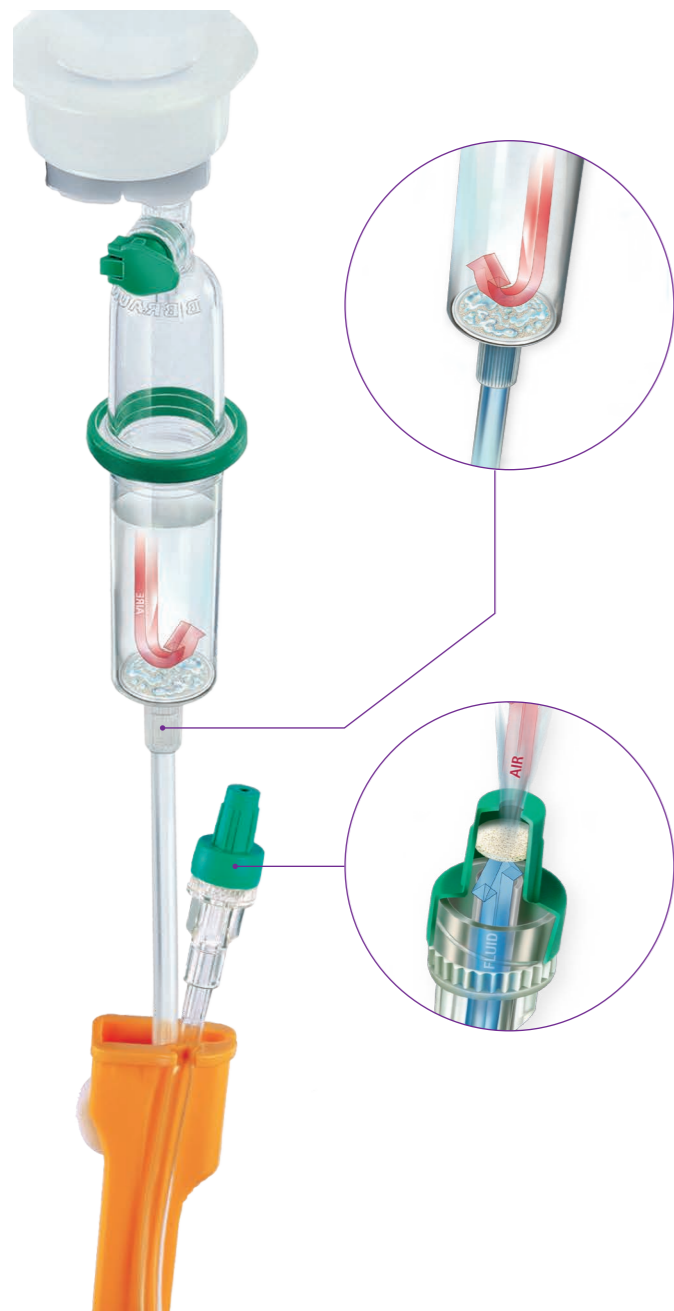

AirStop: Filtro especial en la cámara de goteo que previene la infusión de aire

- No permite la entrada de aire en el tubo si se vacía la cámara
- Filtra partículas de 15 µm
- Seguridad en el cambio de infusiones
- Menor manipulación del sistema

PrimeStop: Tapón protector con filtro hidrófobo que evita el goteo y protege de la contaminación

- Cebado automático sin goteos**
- Asegura el llenado de la línea automáticamente
 - No más goteos en manos, mesa o suelo
 - Preparación de la infusión más rápida
 - Mantiene un sistema cerrado hasta que se conecta al paciente
 - Prevención efectiva de la contaminación

Beneficios adicionales de seguridad:



Diseñado para proteger el punzón después de la infusión

- No más pinchazos accidentales



Modelos con punto de inyección

- Válvula sin aguja o llave de tres vías Discifix® C



Tubo atóxico

- Seguridad con la máxima flexibilidad. Sin ftalatos

Intrafix® SafeSet

Seguridad

- Elimina el riesgo de posibles embolismos
- Reduce el riesgo de contaminaciones y flebitis por manipulación
- Permite la infusión de dosis exactas
- Evita el contacto con medicaciones por goteo en el cebado

Ahorro

- Cebado automático ahorrando tiempo
- Elimina goteos proporcionando mayor higiene e infusión de dosis exactas
- Al no haber riesgo de entrada de aire en el tubo, el equipo es reutilizado varias veces
- Menor tasa de infección reduciendo la hospitalización y el consumo de antibióticos

Rodillo fino para un control más flexible del flujo. Facilidad para seleccionar un ritmo de goteo.

Adecuado como sistema no específico para sistemas automáticos de infusión. Probados hasta 2 bares de presión positiva.

Intrafix® SafeSet	Intrafix® SafeSet con punto de inyección	Intrafix® SafeSet con toma en Y sin aguja. Caresite	Intrafix® SafeSet con llave Discifix®	Equipo Infusomat® Space SafeSet estándar	Equipo Infusomat® Space SafeSet con toma Safeflow®
180 cm	180 cm	210 cm	220 cm	250 cm	300 cm
4063000	4063005	4063004C	4063006	8701148SP	8700118SP

*Presentación en cajas de 100 unidades