




VENTILADORES MECÁNICOS DE TURBINA


Máxima seguridad en tus anestесias

VENTILADORES MECÁNICOS DE TURBINA


Máxima seguridad en tus anestесias

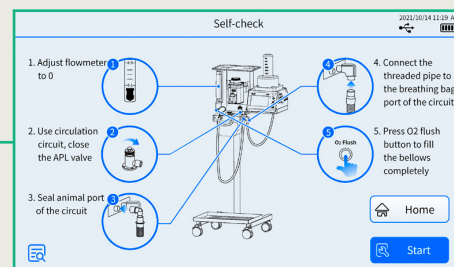

Interfaz de auto test.

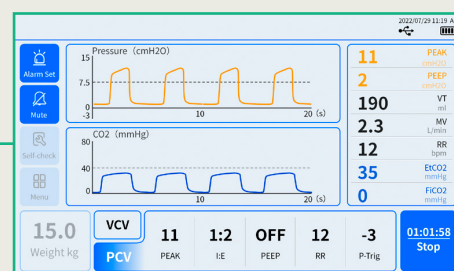

Configuración inteligente.

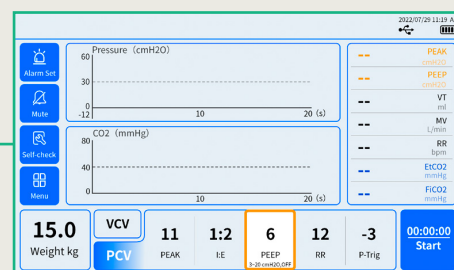

Función PEEP.



Turbina

Turbina electrónica de alto rendimiento, sin necesidad de gas motriz.



Precisión

Volumen Tidal mínimo de 4 ml.



Configuración

Permite establecer valores de forma automática al introducir el peso del paciente.



Seguridad

Monitorización precisa y continua del estado respiratorio.



Dos concertinas incluidas.



Control remoto para mantenimiento de la inspiración.



Monitorización de la capnografía sidestream.

Los ventiladores mecánicos de turbina de la serie V420 no necesitan gas motriz para mover la concertina. El sistema de turbina aporta una solución al elevado consumo de gas en los ventiladores convencionales. Este dispositivo de ventilación mecánica ha estado específicamente diseñado para pacientes veterinarios. Dispone de dos modos de trabajo fáciles de usar y de un sistema de monitorización exhaustiva del estado de la ventilación del animal que garantizan una ventilación segura.



Alarmas

Múltiples alarmas y mensajes de alerta para garantizar la seguridad.



Función PEEP

Ayuda a resolver problemas de bajo SpO_2 durante la cirugía.



Auto test

Auto test de fugas y guía gráfica para inicio rápido.



Control remoto

Control remoto para el mantenimiento en la inspiración.

VENTILADORES MECÁNICOS DE TURBINA

Máxima seguridad en tus anestesias

ESPECIFICACIONES	
Característica	Descripción
Fuerza motriz	Turbina
Medida	291 mm x 336 mm x 462 mm
Peso neto	8.4 kg
Rango del peso del paciente	0,4 kg – 150 kg
Ratio respiratoria	2 ~ 60 rpm
I:E	1:1,0 – 1:4,0
Volumen Tidal	4 – 1.5000 ml
Presión inspiratoria pico	5 – 50 cmH ₂ O
PEEP	3 ~ 20 cmH ₂ O, OFF
Presión Triger	PEEP OFF: -10~ -1cmH ₂ O OFF PEEP ON: -10~ -4cmH ₂ O OFF
Pantalla táctil	7", 1024 x 600 px
Rango de medida de EtCO ₂	0 mmHg – 114 mmHg
Flujo de muestra de EtCO ₂	75 ml/min

CONFIGURACIÓN		
Función	RWD-V420	RWD-V420-PRO
Configuración automática	X	X
Modo ventilatorio controlado por volumen	X	X
Modo ventilatorio controlado por presión	X	X
PEEP	X	X
Monitorización <i>sidestream</i> del EtCO ₂		X
Control remoto de la inspiración		X

X = incluido