

Catálogo para el manejo de heridas



ÍNDICE


Askina® Pad S	4
Askina® Pad	5
Askina® Foam	6
Askina® DresSil Border Lite	7
Askina® Soft	8
Askina® Soft I.V.	9
Askina® Sorb	10
Askina® Carbosorb	11
Askina® Calgitrol Ag+	12
Askina® Calgitrol Paste	13
Prontovet solución	14
Prontosan® Wound Gel X	15

Askina® Pad S

Apósito no adhesivo para catéteres



Askina® Pad S es un apósito no adherente listo para usar. Con hendidura para soporte a la fijación de catéteres. Consiste en un apósito absorbente con una capa de contacto con la herida de baja adherencia, suave para la piel, y de tejido no tejido.

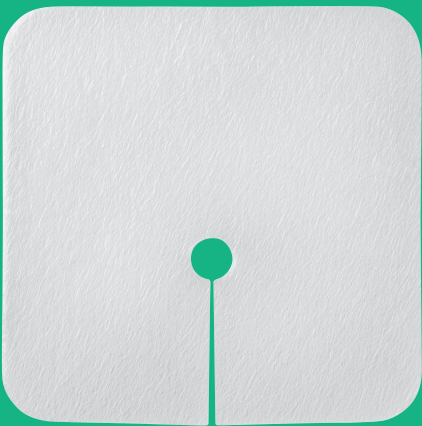

VENTAJAS

- Transpirable.
- Capa posterior resistente al agua.
- Capa de contacto con la herida no adherente.

MATERIAL

Askina® Pad S se compone de tres capas:


- Capa 1: poliéster posterior hidrofóbico.
- Capa 2: fibra superabsorbente (70 % viscosa, 30 % poliéster).
- Capa 3: polietileno no adherente para contacto con la piel.

Askina® Pad S está indicado como apósito absorbente para sitios de drenaje, alrededor de catéteres intravenosos periféricos, sondas de alimentación, catéteres suprapúbicos, etc.

Nombre	Tamaño	Unidades/caja	B. Braun Código artículo
Askina® Pad S	5 x 5 cm	100	WIN9024050
Askina® Pad S	10 x 10 cm	100	WIN9024010

Askina® Pad

Apósito no adhesivo

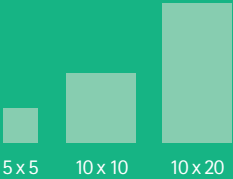

Askina® Pad es un apósito no adherente listo para usar. Consiste en un apósito absorbente con una capa de contacto con la herida de baja adherencia, suave para la piel, y de tejido no tejido.



VENTAJAS

- Transpirable.
- Capa posterior resistente al agua.
- Capa de contacto con la herida no adherente.

MATERIAL

Askina® Pad se compone de tres capas:

- Capa 1: poliéster posterior hidrofóbico.
- Capa 2: fibra superabsorbente (70 % viscosa, 30 % poliéster).
- Capa 3: polietileno no adherente para contacto con la piel.

Askina® Pad está indicado para el manejo de heridas postoperatorias, técnica de fomento y heridas superficiales. Está destinado principalmente a usarse como una barrera mecánica, para compresión o para la absorción de exudado.

Nombre	Tamaño	Unidades/caja	B. Braun Código artículo
Askina® Pad	10 x 10 cm	100	WIN9024034
Askina® Pad	10 x 20 cm	100	WIN9024042
Askina® Pad	5 x 5 cm	100	WIN9024018

Askina® Foam

Apósito de espuma absorbente no adhesivo

Askina® Foam es un apósito no adherente de dos capas, suave, diseñado para absorber y retener exudado de heridas de moderado a alto, mientras proporciona un entorno húmedo que favorece la cicatrización.

La película exterior de poliuretano permeable al vapor protege físicamente la herida del agua y las bacterias. La suavidad y la flexibilidad de la espuma de poliuretano permite una adaptación perfecta a las distintas zonas del cuerpo.



VENTAJAS

- Alta eficiencia en la gestión de exudado.
- Bordes biselados para reducir marcas en los bordes.
- Construcción de espuma suave altamente adaptable.

MATERIAL

Askina® Foam se compone de dos capas:

- Capa 1: película protectora de poliuretano delgada y transparente.
- Capa 2: espuma de poliuretano hidrofílica, suave y transpirable.

El apósito para heridas **Askina® Foam** puede utilizarse para:

- Heridas con exudado de moderado a abundante.
- Heridas crónicas como úlceras por presión, coderas, etc.
- Heridas traumáticas, por ejemplo, quemaduras de primer y segundo grado, y heridas quirúrgicas.

Nombre	Tamaño	Unidades/caja	B. Braun Código artículo
Askina® Foam	5 x 5 cm	10	WIN7240510
Askina® Foam	7,5 x 7,5 cm	10	WIN7240710
Askina® Foam	10 x 10 cm	10	WIN7241010
Askina® Foam	12,5 x 12,5 cm	10	WIN7241210
Askina® Foam	10 x 20 cm	10	WIN7242110

Askina® DresSil Border Lite

Apósito de espuma de silicona adhesiva delgada



Askina® DresSil Border Lite es un apósito de espuma de silicona delgado y altamente adaptable, diseñado para proteger y gestionar un entorno húmedo de cicatrización en heridas crónicas y traumáticas con exudado moderado, leve o sin exudado.

La delgada espuma de poliuretano permite que el apósito se adapte suavemente a las zonas de difícil cobertura, mientras que la capa de silicona en contacto con la herida reduce el dolor y el trauma durante los cambios de apósito y mejora la comodidad del paciente.



VENTAJAS

- Espuma delgada y adaptable.
- Buena adherencia de la silicona para mantenerse en su lugar.
- Protege la piel y las heridas de la suciedad, el agua y las bacterias.

MATERIAL

Askina® DresSil Border Lite se compone de cuatro capas:

- Capa 1: película exterior de poliuretano.
- Capa 2: tejido no tejido.
- Capa 3: espuma de poliuretano.
- Capa 4: malla de silicona.

La capa exterior impermeable protege la herida de la suciedad y las bacterias.

Askina® DresSil Border Lite puede utilizarse para:

- Zonas de difícil cobertura.
- Heridas crónicas.
- Heridas traumáticas.
- Quemaduras de espesor parcial.

Nombre	Tamaño	Unidades/caja	B. Braun Código artículo
Askina® DresSil Border Lite	10 x 10 cm	10	WIN5381010
Askina® DresSil Border Lite	10 x 20 cm	10	WIN5381210
Askina® DresSil Border Lite	10 x 10 cm	3	WIN5381003
Askina® DresSil Border Lite	15 x 15 cm	3	WIN5381503

Askina® Soft

Apósito para heridas suave
de tejido no tejido

Askina® Soft es un tejido no tejido adhesivo con una almohadilla central absorbente y una capa de contacto con la herida de baja adherencia. El adhesivo acrílico es hipoalergénico y proporciona una adhesión duradera a la piel.



VENTAJAS

- Tela no tejida suave.
- Adhesion duradera.
- Barrera mecánica para heridas.

MATERIAL

Askina® Soft está hecha de:

- Capa 1: tejido no tejido con adhesivo acrílico.
- Capa 2: almohadilla absorbente.
- Capa 3: protectores desprendibles.

Askina® Soft es un dispositivo para el tratamiento de heridas, normalmente utilizado para el manejo de heridas postoperatorias y heridas superficiales.

Nombre	Tamaño	Unidades/caja	B. Braun Código artículo
Askina® Soft	5 x 7,5 cm	50	WIN9086480
Askina® Soft	9 x 5 cm	50	WIN9086501
Askina® Soft	9 x 10 cm	50	WIN9086510
Askina® Soft	9 x 15 cm	40	WIN9086528
Askina® Soft	9 x 20 cm	30	WIN9086536

Askina® Soft I.V.

Apósito de fijación para catéter intravenoso de tejido no tejido



8 x 6

Askina® Soft I.V. es un apósito adhesivo suave de tejido no tejido con una almohadilla central absorbente y una capa de contacto con la herida de baja adherencia. El adhesivo acrílico es hipoalergénico y proporciona una adhesión duradera a la piel.



VENTAJAS

- Tela no tejida suave.
- Adhesión duradera.

MATERIAL

Askina® Soft I.V. está hecho de:

- Capa 1: tejido no tejido blanco.
- Capa 2: adhesivo acrílico sensible a la presión (30 g/m²).
- Capa 3: zona de almohadilla (180 g/m²).
- Capa 4: protectores desprendibles de silicona.

Askina® Soft I.V. está indicado para la fijación de catéteres intravenosos y tubos de drenaje.

Nombre	Tamaño	Unidades/caja	B. Braun Código artículo
Askina® Soft I.V.	8 x 6 cm	50	WIN9086919

Askina® Sorb

Apósito de alginato cálcico


Askina® Sorb es un apósito altamente absorbente compuesto por fibras de alginato de calcio y carboximetilcelulosa sódica (CMC). Este apósito puede absorber grandes cantidades de exudado y formar un gel que mantiene un entorno húmedo favorable para la cicatrización.



10 x 10



15 x 15

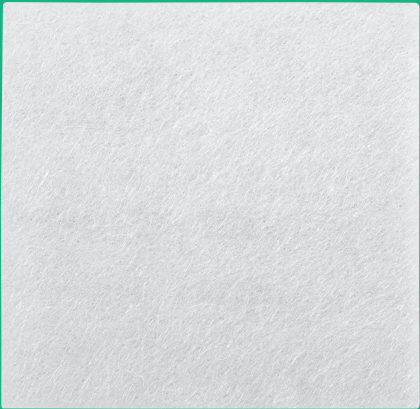

VENTAJAS

- Cicatrización húmeda de la herida.
- Retirada en una sola pieza.
- Se puede cortar para adaptarlo a la herida.

MATERIAL

Almohadilla con fibras (85 % de alginato y 15 % de carboximetilcelulosa sódica (CMC)).

Askina® Sorb está indicado para heridas con exudado moderado o abundante, heridas postoperatorias y heridas traumáticas.

Nombre	Tamaño	Unidades/caja	B. Braun Código artículo
Askina® Sorb	10 x 10 cm	10	WIN2116S
Askina® Sorb	15 x 15 cm	10	WIN2102S
Askina® Sorb	10 x 10 cm	3	WIN2107S

Askina® Carbosorb

Apósito estéril de carbón activo adaptable, no adhesivo

Askina® Carbosorb es un apósito de carbón activo, adaptable, no adhesivo para lesiones que desprenden mal olor. Absorbe bacterias y sustancias malolientes de la lesión que son retenidas por la capa central de carbón activo.



VENTAJAS

- Cicatrización húmeda de la herida.
- Absorción de bacterias de lesiones infectadas y/o que desprenden mal olor.
- Se puede cortar para adaptarlo a la herida.

MATERIAL

- Capa 1: capa externa absorbente de viscosa-rayón y poliamida de tejido no tejido.
- Capa 2: capa central de carbón activo.
- Capa 3: capa de viscosa, poliamida y poliéster en contacto con la lesión.

Askina® Carbosorb está indicado en el tratamiento de las lesiones con exudación moderada a intensa, y proporcionará las condiciones más propicias para la cicatrización en el medio subyacente.

Nombre	Tamaño	Unidades/caja	B. Braun Código artículo
Askina® Carbosorb	10 x 10 cm	10	WIN9025006
Askina® Carbosorb	10 x 20 cm	10	WIN9025014

Askina® Calgitrol Ag+

Apósito de alginato e iones de plata




10 x 10



15 x 15

Askina® Calgitrol Ag+ es un apósito estéril con gran capacidad de absorción del exudado y efecto antimicrobiano de amplio espectro durante 7 días. Adaptable a las distintas anatomías del cuerpo y permeable al vapor de agua e intercambios gaseosos.

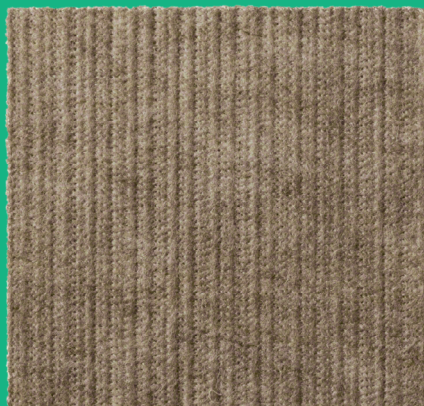

VENTAJAS

- Distribución homogénea y gradual de los iones de plata debido a su reacción con el exudado.
- Retirada indolora del apósito.

MATERIAL

- Capa 1: poliuretano reticulado con gran capacidad de absorción.
- Capa 2: capa de alginato e iones de plata, en contacto con la lesión.

Askina® Calgitrol Ag+ está indicado para la cura húmeda de lesiones infectadas o no infectadas de diversa etiología.

Nombre	Tamaño	Unidades/caja	B. Braun Código artículo
Askina® Calgitrol Ag+	10 x 10 cm	10	SFM6211010
Askina® Calgitrol Ag+	15 x 15 cm	10	SFM6211510

Askina® Calgitrol Paste

Apósito estéril de alginato con plata iónica en pasta



15 g

Apósito estéril compuesto por una matriz de alginato y plata iónica en formato pasta de 15 g y con cánula para facilitar su aplicación.



VENTAJAS

- Cánula para fácil aplicación.
- Efecto antimicrobiano de 7 días.

Indicado en la cura húmeda y térmica de lesiones infectadas o no infectadas de diversa etiología. Proporciona un efecto antimicrobiano de amplio espectro (durante 7 días) sin inducir resistencias. Uso exclusivo externo.

Nombre	Tamaño	Unidades/caja	B. Braun Código artículo
Askina® Calgitrol Paste	15 g	5	7211598

ProntoVet solución

Solución de polihexanida y betaína



350 ml

Solución para el lavado de heridas. Posee una excelente capacidad de limpieza y de descontaminación de la superficie tisular incluso en superficies de difícil acceso, como cavidades, grietas o heridas profundas. Su aplicación no produce dolor y es bien tolerada por los alérgicos.



VENTAJAS

- Para heridas agudas y crónicas.
- Retirada indolora de vendajes y apósitos.
- Envase estéril.

MATERIAL

0,1% polihexanida, betaína (surfactante), agua purificada.

Nombre	Tamaño	Unidades/caja	B. Braun Código artículo
ProntoVet solución	350 ml	10	400601

Prontosan® Wound Gel X

Gel de polihexanida y betaína



Limpieza e hidratación de heridas de la piel y quemaduras para la prevención de la biopelícula.



VENTAJAS

- Elimina y previene el biofilm.
- Previene infecciones.
- Reduce el tiempo de curación.
- Facilita los cambios de apósito sin dolor.
- Es compatible con los apósitos para heridas comúnmente usados.

MATERIAL

0,1% polihexanida, betaína (surfactante), agua purificada, glicerol, hidroxietilcelulosa.

Nombre	Tamaño	Unidades/caja	B. Braun Código artículo
Prontosan® Wound Gel X	250 g	1	400517
Prontosan® Wound Gel X	50 g	1	400508

