



La importancia de elegir el material apropiado

Combina **Caresite**[®] con SwabCap[®] y Omniflush[®] para un óptimo protocolo de desinfección en tu clínica.



En los últimos años ha aumentado muchísimo la concienciación del personal veterinario sobre las lesiones por pinchazo de aguja. Además, los efectos a corto y largo plazo de la exposición a fármacos peligrosos son preocupantes para cualquier persona que deba vivir y trabajar cerca de estas sustancias.

La cartera de productos B. Braun cubre todos los pasos de la terapia de infusión, desde el recipiente, pasando por la vía de infusión, hasta el acceso vascular.



Accesorios de infusión

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



VÁLVULAS SIN AGUJA

Para la realización de terapias intermitentes sin necesidad de utilizar agujas, eliminando el riesgo de pinchazos accidentales en el acceso venoso. Disponibles con alargadera.

Caresite®

Válvula de presión positiva que impide el reflujo hacia el catéter evitando la oclusión.

- Fabricada con poliamida microcristalina.
- Caudal de 208 ml/min.
- Indicado para Servicio de urgencia y radiología.



Safsite®

Válvula de presión negativa con tapón.

- Caudal de hasta 400 ml/min.
- Indicado para UCI / Servicio de urgencias / Quirófano / Radiología / Unidad de recuperación post-anestesia.



Safeflow

Válvula de presión negativa sin tapón con canal de paso de líquidos recto, que permite un flujo de líquidos ininterrumpido con caudales de 360 ml/min.

- Indicado para UCI / Servicio de urgencias / Quirófano / Radiología / Unidad de recuperación post-anestesia.



ALARGADERAS

Para la prolongación de líneas de infusión, en B. Braun disponemos de **alargaderas lineales** de 10 a 85 cm con/sin puntos de inyección y pinza lateral, **alargaderas espiral** que permiten mayor libertad de movimiento y nivel de seguridad al reducir el peligro de dislocación del catéter durante la manipulación y **alargaderas con válvulas sin aguja** que permiten la manipulación alejada del sitio de inserción y reducen las complicaciones del acceso vascular.



TAPONES

SwabCap®

Tapón de desinfección para válvulas sin aguja, que incluye una esponja impregnada de alcohol isopropílico al 70% (IPA).

- Para utilizar antes del acceso a la línea y como barrera física a la contaminación entre los accesos a la línea.
- Cubre y desinfecta la válvula y su contorno.



Tapa sellada con rosca
El alcohol se queda dentro y mantiene los contaminantes fuera

70% IPA
Baña los hilos y parte superior del conector con IPA



Tapón de color
Para confirmación visual

Tapón intermitente

Tapón para colocar en accesos intravenosos o accesorios de infusión para realizar inyección intermitente.

- Con membrana de látex para inyección múltiple e higiénica de medicamentos.
- Conexión Luer-Lock sin riesgo a fugas y cierre eficaz para llaves de varias vías y cánulas intravenosas.
- Anillo con ranuras para sujetar con facilidad incluso con guantes mojados.



Tapón de cierre Combi


Tapón de cierre versátil con conexión macho y hembra compatible con conexiones Luer y Luer-lock.

- Puede utilizarse en todo tipo de catéteres y conexiones de equipos y accesorios de infusión, sin riesgo de fugas.
- Con estrías en la parte externa del tapón para facilitar su apertura y cierre incluso con las manos mojadas.



EQUIPOS DE INFUSIÓN

Intrafix® Primeline equipo de infusión intravenosa con toma de aire para infusión por gravedad y **Intrafix® SafeSet** con sistema de seguridad Air-Stop, tecnología aplicada a través de un filtro para evitar la entrada de aire en el tubo en caso de vaciado total del contenedor de la solución de infusión.

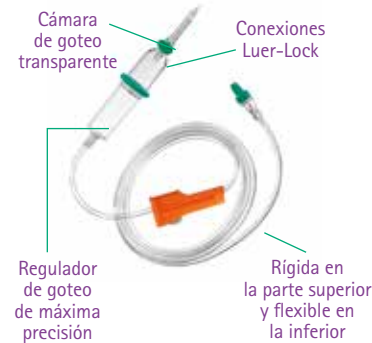


Exadrop®

Regulador de precisión diseñado para uso en situaciones de infusión venosa por gravedad que requieren la seguridad de un caudal constante.



Sangofix® B

Equipo de transfusión sanguínea sin toma de aire para bolsas de sangre.

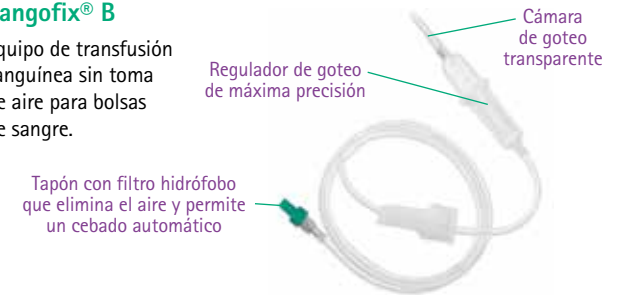

FILTROS

Filtro Sterifix® 0,2 peonza

Filtro de inyección-aspiración con membrana de nylon de 0,2 micras.


- Retiene partículas, antibacteriano y conexión Luer-Lock.



Mini-Spike®

Filtro-punzón para la manipulación de fármacos inyectables.

- Diferentes filtros según referencias para evitar contaminaciones.

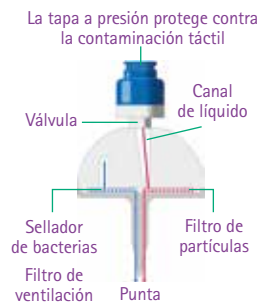

- Para envases multiusos en los que el medicamento ya está en forma líquida.
- Para envases multiusos en los que el medicamento está en forma de polvo y todavía necesita ser disuelto.
- Para la preparación, reconstitución y extracción segura de agentes citostáticos, con retención de aerosoles tóxicos y de partículas.

LLAVE DE TRES VÍAS

Discofix® C

La llave de tres vías que elimina riesgos de grietas y roturas.

- Fabricada con poliamida microcristalina.
- Previene goteos, contaminación y posibles embolismos.
- Mantiene la conexión segura incluso en tiempo prolongado.
- Ergonomía y comodidad. Giro sin límite de 360°.
- Compatible con todos los sistemas y accesorios de infusión.



ADAPTADORES

Combifix®

Adaptadores para la interconexión de accesorios macho y hembra con 6% (Luer), 10% (Rekord) y accesorios cónicos.

