

DISPONIBLE EN TRES VERSIONES:

Introcan e Introcan W: catéteres diseñados para usarse con técnica de una sola mano.

Vasofix®: catéter con puerto de inyección integrado y aletas flexibles.


Con y sin aletas



Introcan Safety®	Tamaño	Longitud		Flujo ml/min	Código de producto	
		mm	Ø/mm		Sin aletas	Con aletas
	24G	14	0,7	26	4251607-01	4251614-01
	24G	19	0,7	22	4251601-01	4253523-01
	22G	25	0,9	35	4251628-01	42535407-01
	20G	25	1,1	65	4251652-01	
	20G	32	1,1	60	4251644-01	4253566-01
	18G	32	1,3	105	4251687-01	4253604-01
	18G	45	1,3	100	4251679-01	4253590-01
	16G	32	1,7	215	4251709-01	
	16G	50	1,7	210	4251695-01	4253612-01
	14G	50	2,2	345	4251717-01	4253639-01

Vasofix® Safety	Tamaño	Longitud		Flujo ml/min	Código de producto
		mm	Ø/mm		
	24G	19	0,7	22	4269071S-01
	22G	25	0,9	36	4269098S-01
	20G	25	1,1	65	4269217S-01
	20G	33	1,1	61	4269110S-01
	18G	33	1,3	103	4269330S-01
	18G	45	1,3	96	4269136S-01
	16G	50	1,7	196	4269179S-01
	14G	50	2,2	343	4269225S-01

B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 08191 Rubí (Barcelona) | Servicio Atención Clientes Teléfono 902 47 47 01 | Fax 902 48 48 01
atencioncliente.vetcare@bbraun.com | www.bbraun-vetcare.es

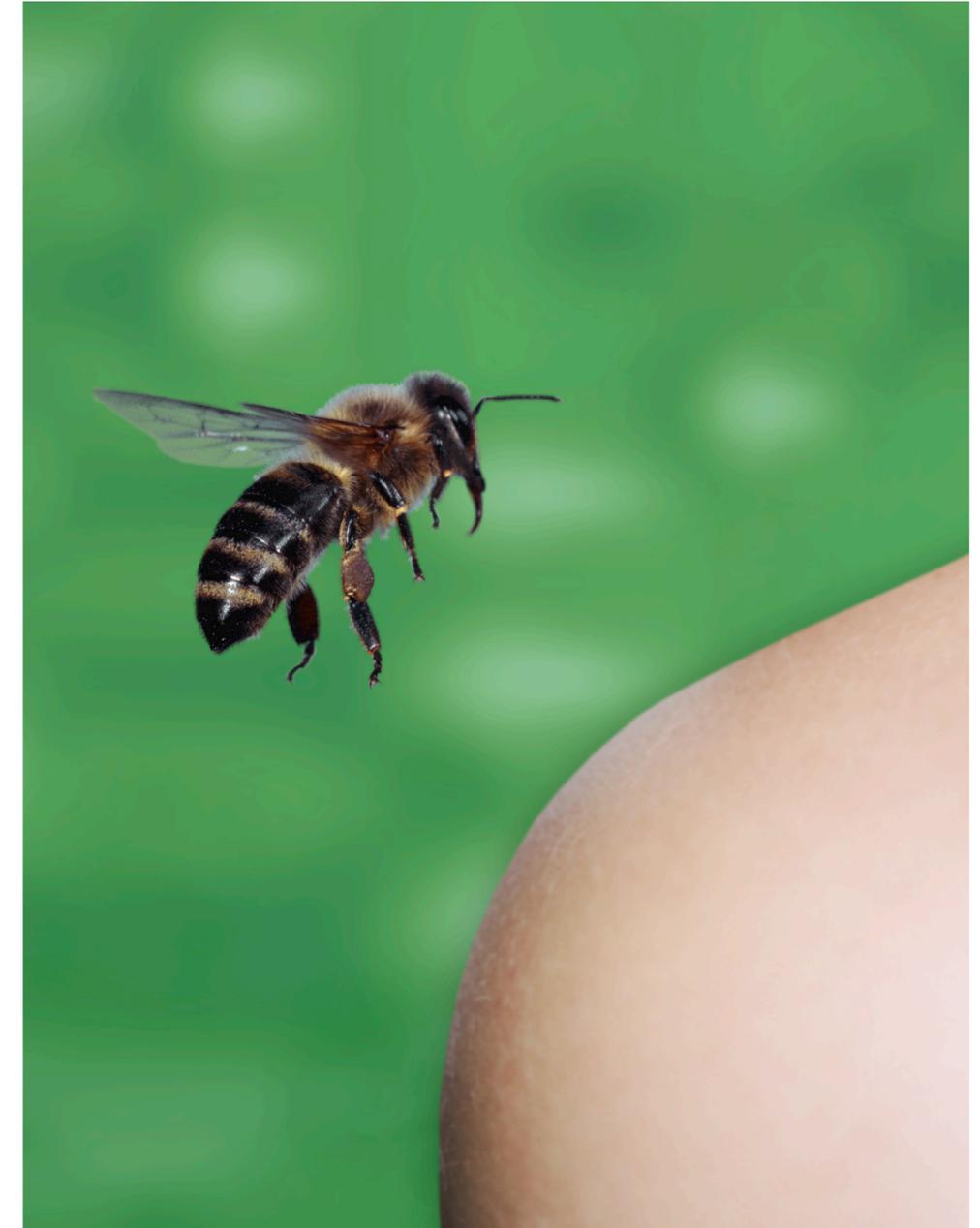

¿TE GUSTAN LOS PINCHAZOS?
SEGURIDAD B. BRAUN VETCARE. CATÉTERES SAFETY

93%

de los veterinarios se han pinchado alguna vez durante su ejercicio profesional



CATÉTERES DE SEGURIDAD PASIVA INTROCAN SAFETY® Y VASOFIX® SAFETY

Catéteres intravenosos periféricos con sistema de seguridad anti-pinchazos de activación pasiva. Evitan el riesgo de pinchazos accidentales.

Incorporan un sistema automático de protección. Un protector cubre de forma pasiva el bisel de la aguja metálica al retirarla después de la colocación de un catéter.


SEGURO PARA EL VETERINARIO

- No requiere activación por el usuario
- La punta de la aguja se cubre automáticamente al ser retirada
- No hay riesgo de activación accidental
- No se puede desactivar
- Permanece activo después de su eliminación



CÓMODO PARA EL PACIENTE Y EL VETERINARIO

- Inserción cómoda y atraumática gracias a un bisel trifacetado y a una mínima transición entre la aguja y la punta del catéter

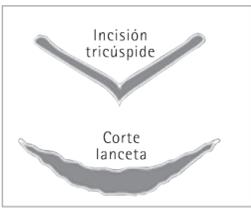

FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO

- Cámara transparente para visualización de la sangre con filtro hidrófobo
- Conexiones de seguridad Luer-Lock
- Cuatro líneas radiopacas incrustadas en el material del catéter




RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

- No contiene PVC y al destruirlo no libera sustancias tóxicas



74%

de los veterinarios se pincharon en el último año

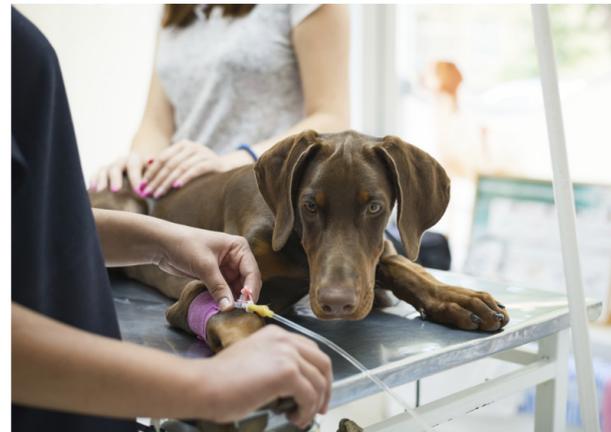

SEGURO PARA EL PACIENTE

- Implantación suave, permanencia cómoda y resistente a acodaduras debido al material empleado en su fabricación (poliuretano certón)
- Exento de látex y DEHP (ftalatos)

Tecnología de doble flashback que indica la colocación correcta del catéter y el éxito de la venopunción. Esta confirmación segura aporta confianza.

