


# Sistema de anestesia VetCare®



Equipos de anestesia y ventilación

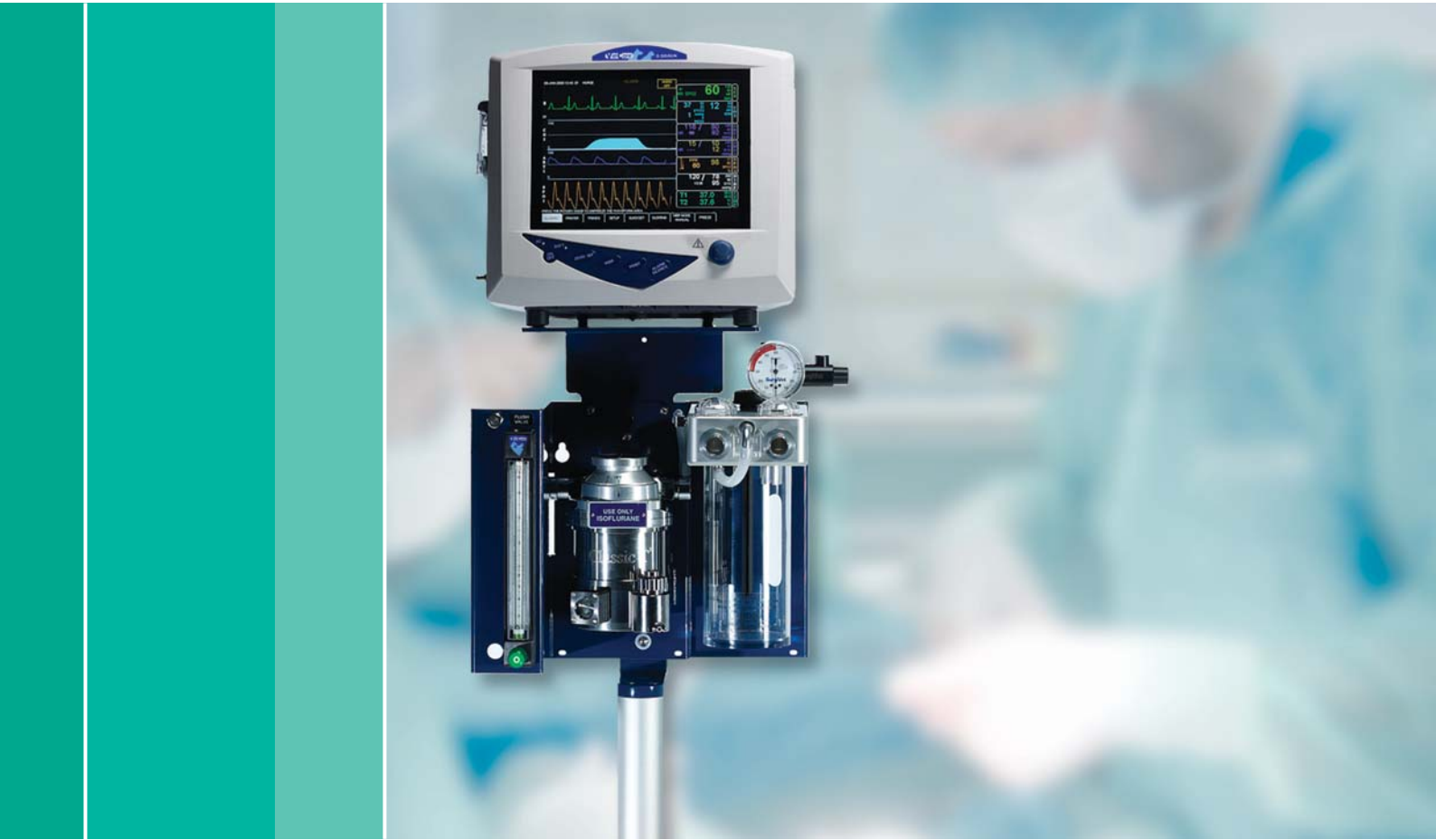

Anestesia inhalatoria y ventilación mecánica

# Equipos de anestesia

## Equipos de anestesia serie CDS9000

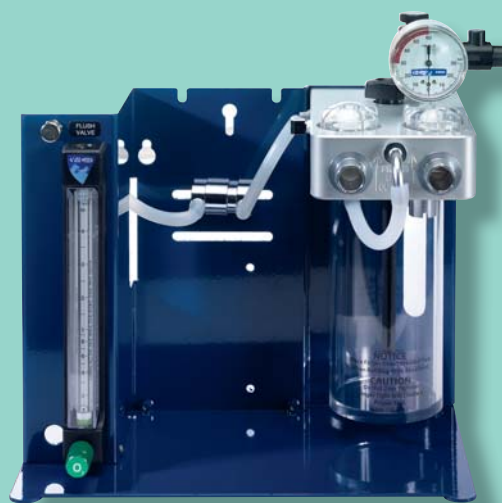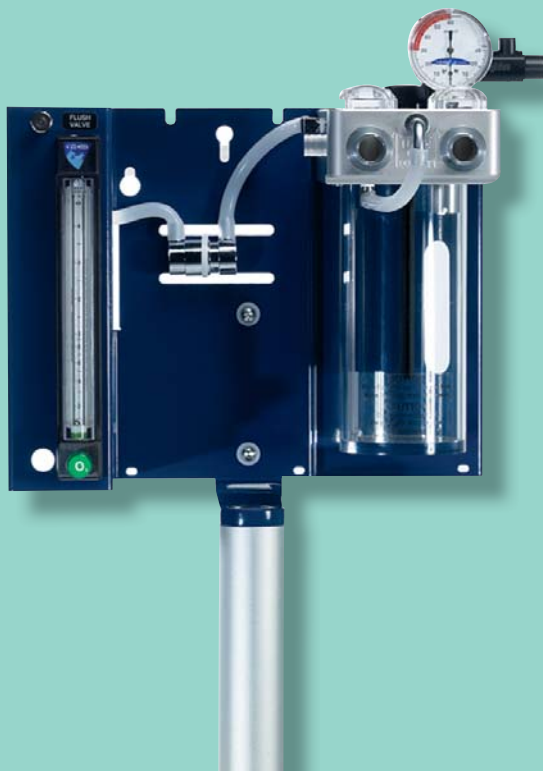

### Características

- Los equipos de anestesia VetCare® serie CDS9000, específicamente diseñados para uso veterinario, son de nuevo diseño y están formados por un modelo de soporte con ruedas (WWV9000B) y otro de sobremesa (WWV9010) con posibilidad de acople a la pared
- Disponibilidad de kits opcionales que permiten transformar un equipo de pared en un equipo con ruedas y viceversa, ampliando la versatilidad de uso
- Nuevo bloque universal que incorpora todos los elementos del sistema reinhalatorio y salida de gases frescos en una sola pieza, eliminando el riesgo de fugas y garantizando la correcta administración de la anestesia al paciente
- Salida de gases frescos independiente para una fácil colocación del circuito respiratorio abierto
- Membranas de las válvulas de inhalación y exhalación irrompibles que no se pegan con la humedad de la respiración
- El cánister cuenta con un sistema que permite un rápido y sencillo cambio de la cal sodada. Dispone de un recorrido del aire exhalado mayor para aumentar la eficiencia de absorción del CO<sub>2</sub>, con lo que se incrementa la duración de la cal sodada
- La válvula de descarga está diseñada para conectar un filtro que absorba los gases de desecho y mantenga una presión interna en el sistema para tener pasivamente llena la bolsa de reinhalación
- Rotámetro con caudal de 200 ml a 4 lpm de O<sub>2</sub>
- Su diseño permite adaptar cualquier vaporizador del mercado
- Un soporte opcional hace posible la fijación de un monitor en la parte superior de forma totalmente segura
- Pintado con un sistema que permite una fácil y rápida limpieza

#### Códigos de producto:

WWV9000B Equipo anestesia VetCare® CDS9000  
WWV9010 Equipo anestesia sobremesa/pared CDS9010

#### Kits opcionales:

WWV90TT Kit de sobremesa  
WWV90WM Kit de pared  
WWV90PK Kit de pie  
WWV90MB Kit soporte para monitor

## Vaporizador T3



## Ventilador automático para pequeños animales (PA)



### Características

- Vaporizador T3 de nueva fabricación inspirado en el original T3, la elección preferente en veterinaria durante 30 años
- Fabricado y mejorado con nuevas piezas que aportan total precisión, fiabilidad y mayor durabilidad contra corrosión
- Temperatura y flujo compensado para cada anestésico inhalatorio
- Amplia ventana frontal que permite un fácil control del nivel de anestésico y sistema de llenado de una sola pieza sin soldaduras para evitar posibles fugas

#### Código de producto:

VCT302 Vaporizador T3 Isoflurano  
Disponible para Sevoflurano

### Características

- Control de la ventilación a través de 3 parámetros
- Suministra al paciente respiraciones iguales a las respiraciones naturales
- Controles ajustables de:
  - Flujo
  - Frecuencia respiratoria (respiraciones por minuto)
  - Tiempo inspiratorio
- Es el único ventilador veterinario que permite el control del ratio I:E. Es un valor variable, no prefijado
- Fácil de utilizar. Sólo debe:
  - Seleccionar las respiraciones por minuto
  - Fijar la cantidad de flujo inspiratorio
  - Igualar la respiración del paciente
- A diferencia de la mayoría de los ventiladores controlados eléctricamente, el ventilador VetCare® PA se adapta al transporte de pacientes. Dispone de un botón que suministra respiraciones manuales sin depender de la energía eléctrica

Código de producto: V725000B Ventilador VetCare® PA

