


# Instrumental Quirúrgico Aesculap

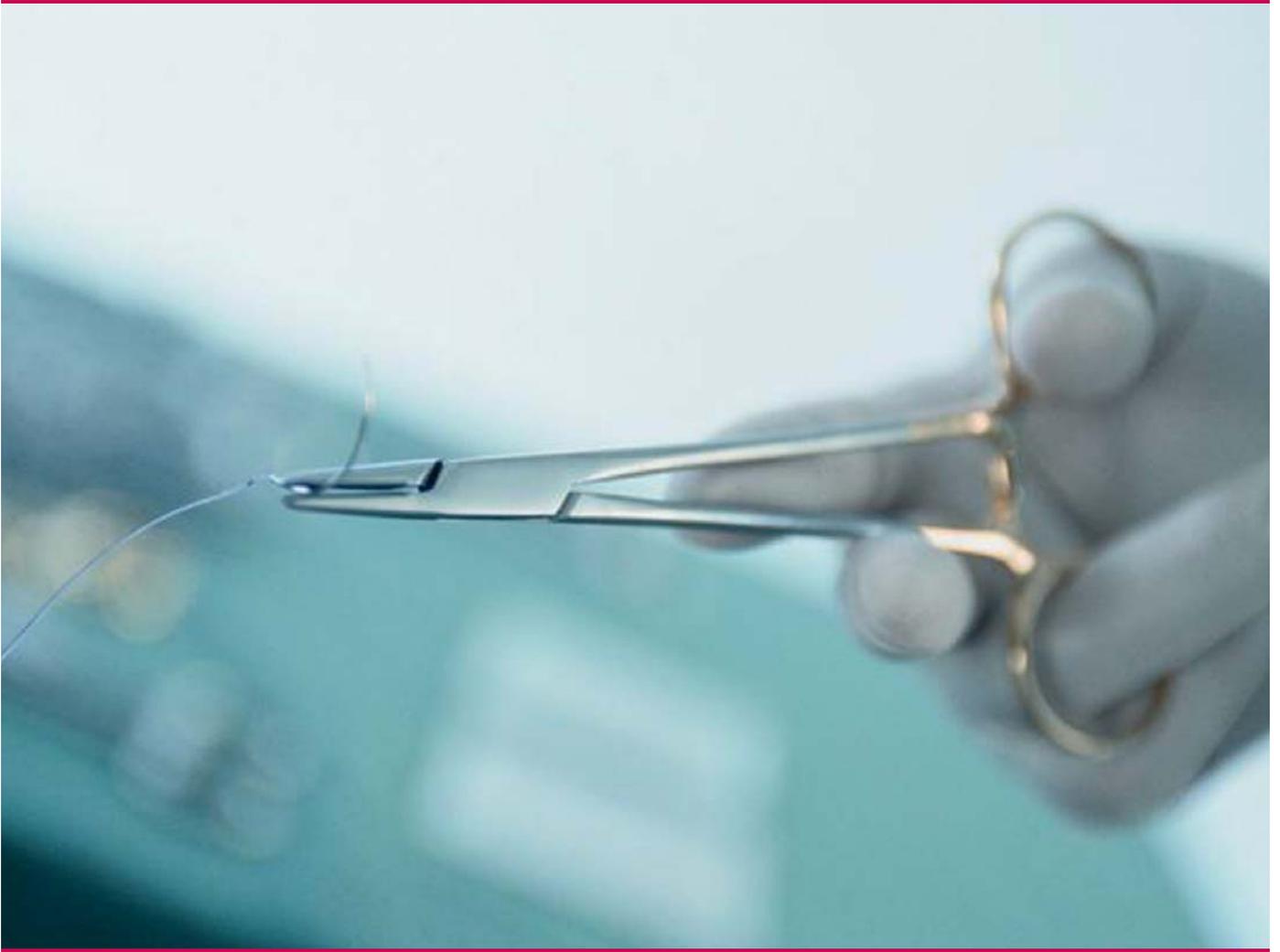

**Una Alianza a largo plazo**

# Calidad Superior

## Acero Inoxidable

### Superando todos los estándares

El instrumental quirúrgico **AESCLAP®** se fabrica con una selección de las mejores materias primas y la aleación exacta de Acero, Cromo, Níquel y Molibdeno para conferir a cada instrumento las cualidades exigidas; dureza, flexibilidad,...

Los estándares de calidad **AESCLAP®** superan ampliamente las especificaciones de las diferentes normativas alemanas y europeas (DIN, ISO) para ofrecer solamente la calidad máxima de instrumental quirúrgico.




### Diseño Innovador

El instrumental **AESCLAP®** es también único en su diseño. La innovación incorporada en las pinzas hemostáticas consistente en una articulación en forma de "oliva" hace que ésta sea más elástica y menos probable su rotura.



### Tecnología y artesanía se unen en Aesculap

Con más de 130 años de experiencia en la fabricación de instrumental quirúrgico, sólo la mano experta de los artesanos de **AESCLAP®** en Tuttlingen (Alemania) garantiza la precisión y fiabilidad que caracteriza al instrumental **AESCLAP®**.

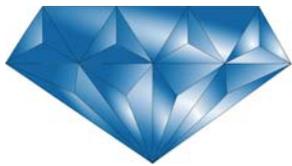

# Carburo de Tungsteno


## Dureza y Resistencia Extremas

Los instrumentos con los anillos o extremos dorados incorporan placas de Carburo de Tungsteno en la punta que le aportan una dureza superior, mayor resistencia a la corrosión y un menor desgaste.



## Corte perfecto

En el caso de las tijeras Durotip®, el carburo de tungsteno hace que corten de una manera nítida y constante. Además, reduce el desgaste del filo y alarga su vida útil.

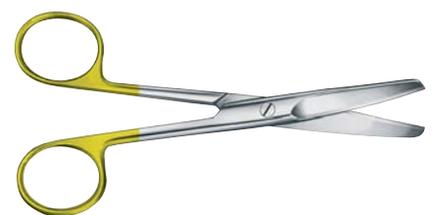


## Un perfil adecuado para cada calibre de sutura

Las placas de carburo de tungsteno de la boca de los porta-agujas Durogrip® tienen un perfil grabado para adaptarse perfectamente al tamaño de la aguja de la sutura y conseguir un agarre perfecto.

### RECOMENDAMOS:

Perfil Liso:	Suturas oftálmicas 9/0-11/0 USP
Perfil Grabado 0,2:	Suturas oftálmicas 6/0-10/0 USP
Perfil Grabado 0,4:	4/0-6/0 USP
Perfil Grabado 0,5:	Suturas de calibres mayores a 3/0 USP


\*para calibres superiores a 2 USP se recomienda, además de un perfil de 0,5, que el porta-agujas tenga más de 160 mm de longitud.

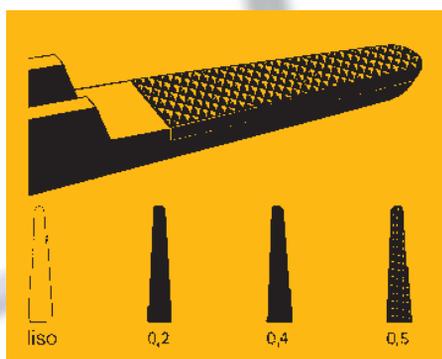

# Fiabilidad

## El Aliado de Confianza

En el quirófano no hay lugar para errores. Cuando en la cirugía el éxito depende de muchas variables; estado del paciente, patología, grado de lesión, alteraciones de coagulación, etc... los instrumentos quirúrgicos no pueden fallar. Aesculap es el aliado de confianza del cirujano, cuando no hay margen de error.

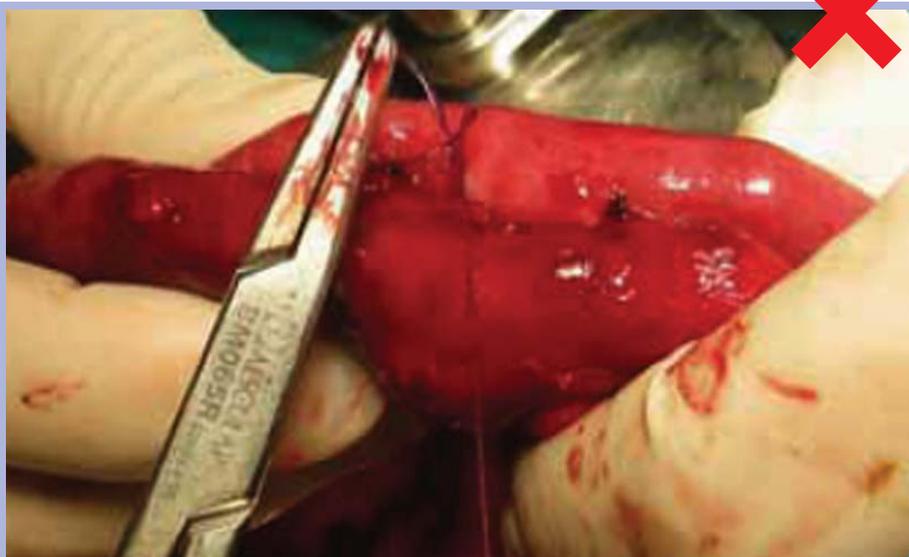

## Versatilidad

En todo tipo de procedimientos quirúrgicos, el instrumental Aesculap ofrece las máximas garantías de fiabilidad y seguridad.



## Precisión

En las intervenciones quirúrgicas más delicadas, Aesculap es sinónimo de precisión.





# Durabilidad

## Resistencia al uso intensivo


El instrumental quirúrgico **AESCULAP®** está diseñado y fabricado para durar. La selección de las mejores materias primas contribuye a su elevada resistencia y durabilidad.

Para asegurar una conservación óptima, conviene seguir unos sencillos protocolos de limpieza y mantenimiento:


- Limpiar el instrumental inmediatamente después de su uso. No dejarlo nunca en remojo.
- Utilizar siempre agua desmineralizada y detergente enzimático (**Helizyme®**).



- Enjuagado con agua desmineralizada.

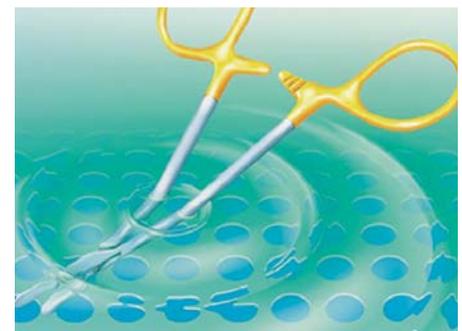

- Lubricación con aceite especial

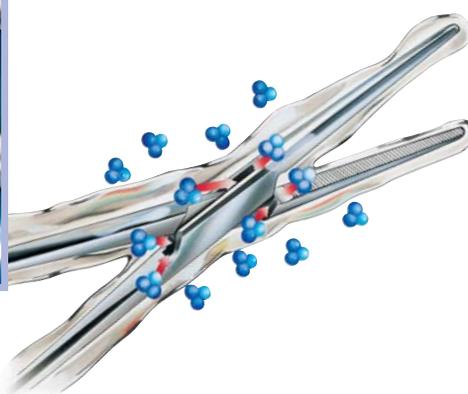

# Garantía


## Confianza

En B. Braun confiamos en lo que hacemos. Por eso ofrecemos 1 año de garantía en todas nuestras piezas **AESFULAP®** de Acero Inoxidable y hasta 3 años en las de Carburo de Tungsteno.



## Servicio Técnico AESFULAP®

El ATS (Aesculap Technical Service) ofrece un servicio profesional a la hora de reparar las piezas deterioradas o en las intervenciones rutinarias como el afilado de tijeras y otros instrumentos de corte.

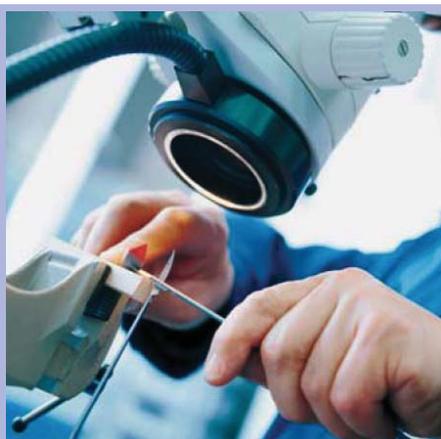

## Trazabilidad



Cada instrumento **AESFULAP®** está grabado con su código, número de serie y un código Data Matrix que permite determinar la procedencia de las materias primas, la fecha de fabricación, el lugar y la ruta completa del proceso por si es necesario determinarla.





# Gama

## La gama más amplia

La gama de instrumental quirúrgico AEscULAP® es la más amplia que existe y ofrece soluciones para todas las especialidades de la cirugía veterinaria.



### Cirugía de Tejidos Blandos



### Odontología



### Traumatología y Ortopedia

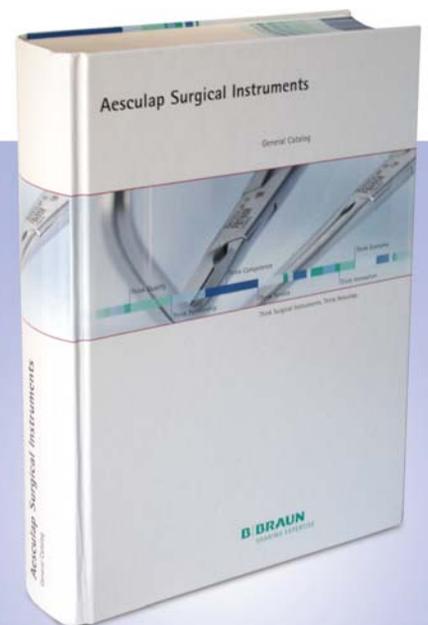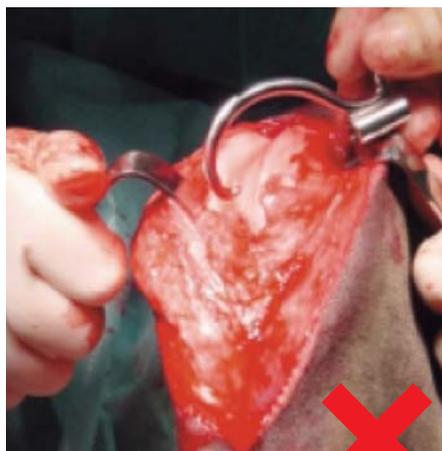

Soluciones para todas las especialidades quirúrgicas

Con más de 17.000 productos, AEscULAP® satisface todos los requerimientos del cirujano veterinario.



AESCULAP®



Catálogo completo on-line:

[www.surgical-instruments.info](http://www.surgical-instruments.info)

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

**B. Braun VetCare SA**

Ctra. Terrassa, 121  
08191 Rubí (Barcelona)

Servicio Atención Clientes  
Teléfono 902 47 47 01  
Telefax: 902 48 48 01  
e-mail: [atencioncliente.vetcare@bbraun.com](mailto:atencioncliente.vetcare@bbraun.com)  
[www.bbraun-veterinaria.es](http://www.bbraun-veterinaria.es)