




Máquina de anestesia R650

Un nuevo equipo para un trabajo
más seguro, cómodo y sencillo.

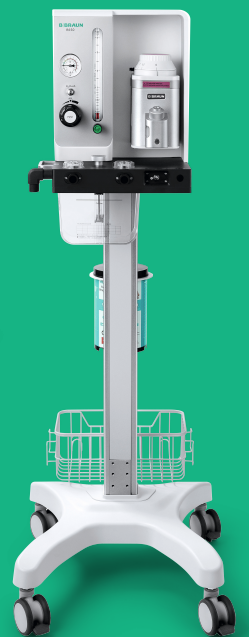

Nueva máquina de anestesia R650



B. Braun contribuye a la anestesia veterinaria con un nuevo equipo para un trabajo más seguro, cómodo y sencillo.

Manómetro para los circuitos anestésicos

Interruptor para el cambio de circuito anestésico



Vaporizador de alta precisión



Para los dos tipos de circuitos respiratorios



Este equipo de anestesia modular y configurable permite incorporar el nuevo ventilador V420, concentrador de oxígeno y monitor.

Características del ventilador V420:

- Turbina de alto rendimiento sin necesidad de gas motriz.
- Volumen Tidal mínimo de 4 ml.
- Valores automáticos introduciendo el peso del paciente.
- Función PEEP.



Válvula APL

Vaporizador

Filtro de gases



Eliminación efectiva del gas residual



Diseño integrado



Diseño compacto para reducir riesgo de fugas

Especificaciones

Vaporizador	Concentración de salida 0-5% de isoflurano Concentración de salida 0-8% de sevoflurano Trabajar a 10-35 °C Capacidad > 120 ml
Flujo de O₂	0,1-4 L
Manómetro	-20 cmH ₂ O -100 cmH ₂ O
Volumen canister	2,1 L
Válvula APL	0-70 cmH ₂ O
Presión suministro O₂	<0,5 Mpa
Filtro de gases	800 g peso neto (puede absorber 200 g)

La máquina de anestesia viene equipada con tubos endotraqueales, circuitos respiratorios y un filtro de gases.

Código	Descripción
RWD-V650-IE	Máquina de anestesia R650
RWD-V420	Ventilador de turbina

