



B. Braun te introduce en la
terapia de presión negativa
con su nuevo servicio

¿Qué es la presión negativa para terapia de curación de heridas?

La terapia de presión negativa (TPN) consiste en la aplicación de vacío en el lecho de la herida en un ambiente húmedo cerrado, lo que proporciona múltiples beneficios para la cicatrización por segunda intención, reduce los tiempos de curación y disminuye notablemente las posibles complicaciones.

Beneficios que aporta la terapia de la presión negativa

- ✓ *aspiración del exudado / obliteración de espacios muertos.*
- ✓ *estimulación de la formación de tejido de granulación y de la proliferación celular.*
- ✓ *aumento del flujo sanguíneo local y de la angiogénesis.*
- ✓ *reducción de la carga bacteriana / no formación de biofilm / aspiración del exudado.*
- ✓ *reducción del edema y de la respuesta inflamatoria nociva, disminución de metaloproteinasas.*
- ✓ *contracción y reducción del área de la herida.*

La TPN ha mostrado una notable reducción del tiempo de curación de fase inflamatoria a fase proliferativa y de la frecuencia de curas. La herida queda sellada por un sistema de vendaje que proporciona aislamiento externo, tanto físico como microbiológico.



1. Fascitis necrotizante tratada con TPN Invia Liberty. Después de 3 días se aprecia reducción del edema y signos de infección.

¿Cómo funciona el servicio que ofrece B. Braun VetCare?

- Servicio de alquiler del equipo hospitalario de vacío Invia® Liberty en un caso clínico (una semana).
- Envío y recogida del equipo por parte de B. Braun VetCare.
- Primer caso clínico gratuito (máquina y apósitos incluidos).
- A partir del segundo caso, se facturará el alquiler del equipo y el fungible necesario para llevar a cabo la terapia.

Indicaciones:

- Heridas agudas con pérdida de tejidos.
- Fracturas abiertas.
- Heridas crónicas.
- Dehiscencia de cierre quirúrgico por excesiva tensión o infección de sitio quirúrgico.
- Disminución de complicaciones en cirugía reconstructiva (colgajos, injertos).
- Heridas penetrantes torácicas.
- Enfisema subcutáneo.
- Abdomen séptico.


Imágenes cedidas por Araceli Calvo.
Hospital Anicura Ars Veterinaria.



2. 7 días después de la retirada del equipo.

Equipo Invia® Liberty y apósitos

- Presión negativa continua o intermitente.
- Rango: -40 mmHg hasta -200 mmHg.
- Indicador de fuga en la pantalla.
- Equipo ligero y compacto (1kg).
- Conexión de tubos cómoda, segura y fácil.
- Apósitos de 3 cm de grosor para reducir el riesgo de fugas.

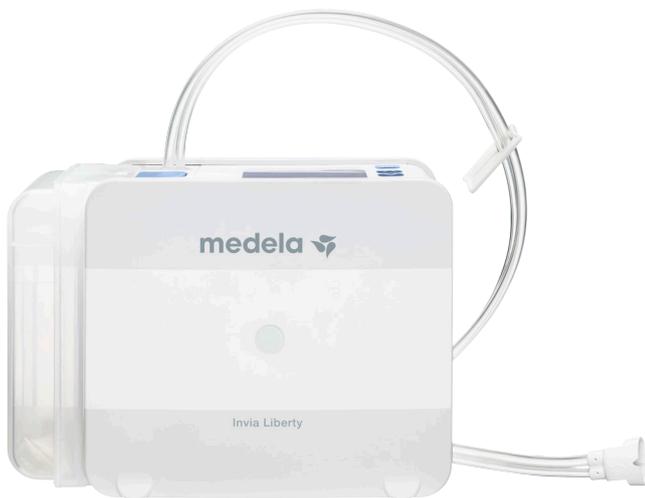

Código	Descripción	Unidades/caja
MEDELA-087-0012	INVIA LIBERTY CANISTER 0,3 L SOL STERIL	10
MEDELA-087-0025	INVIA LIBERTY TUBINC WITH QUICK-CONNECT	10
MEDELA-087-0017	Invia Liberty steril canister 0,8 L	6
87-6221	Invia sponge kit with fitpad size S	3
87-6222	Invia sponge kit with fitpad size M	3
87-6223	Invia sponge kit with fitpad size L	3
MEDELA-087-0003	Invia Liberty NPWT System	1
430827	Invia Liberty Service	1 semana