

La solución completa para el tratamiento odontológico veterinario

- Unidad dental veterinaria D-Pro
- Limpiador dental de ultrasonidos LED D-VS
- Limpiador dental de ultrasonidos LED con depósito RWD-P9L

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



Beneficios de la unidad dental veterinaria D-Pro + Limpiador dental de ultrasonidos LED D-VS

La unidad dental veterinaria D-Pro y el limpiador dental LED D-VS ofrecen una solución completa al estar diseñados para ayudar a los veterinarios a realizar sus tratamientos odontológicos de un modo más fácil y eficiente:

- ✓ Proporcionan una **gran variedad de funciones** como: pulir, cortar y limpiar.
- ✓ Reducción del tiempo de tratamiento y, por ello, del riesgo anestésico.
- ✓ Se reduce el daño causado en el hueso alveolar y en la mucosa oral, así como la retención de las raíces dentales.
- ✓ Proporcionan **soluciones terapéuticas dentales adaptadas a las necesidades de los pacientes.**



Salida de refrigerante del limpiador dental ultrasónico.



Soporte magnético.



Limpiador dental ultrasónico LED (opcional: se puede adquirir aparte).



Separación del agua y la electricidad para una **mayor seguridad del equipamiento.**



Piezas de mano ligeras con rotación de 360°: **reducción fatiga manual.**



Luces LED: **mejor visibilidad del campo quirúrgico.**



Compresor de alta calidad sin aceite: **fácil mantenimiento.**



Tanque de aire de gran capacidad (20L) garantiza una presión balanceada y el suministro a largo plazo, reduciendo la frecuencia de carga de aire.



Drenaje automático de partículas contaminantes y agua del tanque de aire: **fácil mantenimiento diario, reduce el riesgo de oxidación y la prolongación de la vida útil del equipo.**



Soporte magnético: **previene la caída y pérdida accidental de los instrumentos dentales.**



Peso ligero (46 kg en su totalidad) y ruedas lisas: **fácil y suave movilidad.**



Fresa (pieza de mano de alta velocidad).





Pulidor (pieza de mano de baja velocidad).



Pistola rociadora de agua / aire / bruma.

Beneficios del limpiador dental de ultrasonidos LED con depósito RWD-P9L

- ✓ Autonomía gracias al depósito de 350 ml de capacidad para refrigerante.
- ✓ Pieza de mano piezoeléctrica compuesta por una aleación de aluminio:
 - Ligera y resistente.
 - Evita sobrecalentamiento.
 - Con luz LED.
 - Autoclavable.
- ✓ Múltiples funciones: **limpieza, terapia periodontal y endodoncia.**
- ✓ Incluye un set de 4 cabezales de limpieza (T1, T2, T4, T5), 1 cabezal periodontal (T3) y 1 mandril para endodoncia (E1).
- ✓ Incluye limas de endodoncia (TWE).

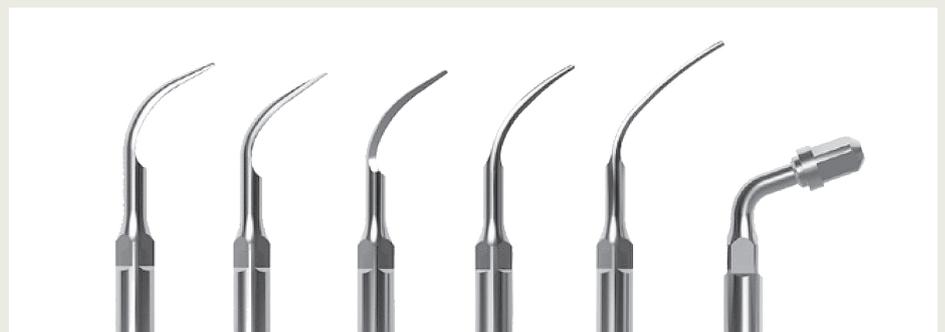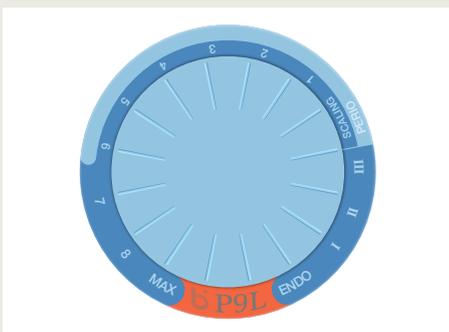

T1

T2

T3

T4

T5

E1

Múltiples funciones: limpieza, terapia periodontal y endodoncia.

Características técnicas de la unidad dental veterinaria D-Pro + Limpiador dental de ultrasonidos LED D-VS + Limpiador dental de ultrasonidos LED con depósito RWD-P9L

Configuración código D-PRO		
Parámetro	Especificaciones	
Dimensiones	Longitud	60cm
	Anchura	48cm
	Altura	95-115cm
	Peso	46 kg
Compresor de aire sin aceite	Potencia	2,6-2,9 A, 220/230V, 50/60 Hz
	Potencia de salida	85 psi
Pieza de mano de alta velocidad	Velocidad	360.000-430.000 rpm
Pieza de mano de baja velocidad	Velocidad	22.000 rpm (sentido horario) 20.000 rpm (sentido antihorario)
Gasómetro	Capacidad	20L
Nivel de sonido		≤ 67db

Código	Descripción	Unidad de Venta
D-PRO	Unidad dental veterinaria Elite	1 ud.
D-VS	Limpiador dental ultrasonidos LED Vet	1 ud.
RWD-P9L	Limpiador dental ultrasonidos LED con depósito	1 ud.
DST-25	Punta succión desechable blanca	25 uds.
3399-SL-SG-SY	Copa regular pieza mano baja vel.	10 uds.
RWD-FG4	Fresas esféricas pieza mano alta vel.	5 uds.
RWD-FG701	Fresas fisura cónicas pieza mano alta vel.	5 uds.
KOMET-H254-314-012	Fresa tungsteno KOMET 5u.	5 uds.
7580P100	Filtro Honeywell 750100	5 uds.
RWD-FV009	Filtro PIP OPV009P1P	10 uds.
706-03228-00	Filtro entrada compresor de aire	1 ud.
997-00005-00	Set puntas raspado 6 tamaños	1 ud.
JG600	Aceite lubricante para instrumental en spray STERILIT®	1 ud.
SEPTO-136S	Detartrine pasta pulido dental (45g)	1 ud.
812-03045-00	Pieza mano alta velocidad LED RWD	1 ud.
RWD-711-03133-00	Pieza de mano del limpiador de ultrasonidos dental	1 ud.
706-03043-00	Pistola rociadora 3 vías agua-aire	1 ud.

Características técnicas de la unidad dental veterinaria D-Pro + Limpiador dental de ultrasonidos LED D-VS + Limpiador dental de ultrasonidos LED con depósito RWD-P9L

Código D-PRO	
Incluye	No incluye
Unidad dental veterinaria (1 ud.)	Pasta de pulir
Pieza de mano de alta velocidad (1 ud.)	Lubricante para las piezas de mano (1 ud.)
Pieza de mano de baja velocidad (1 ud.)	Limpiador Dental Ultrasonidos (1 set de 6 puntas de raspado incluidas)
Pistola rociadora de agua / aire /bruma (1 ud.)	Limpiador Dental Ultrasonidos LED con depósito (1 set de 4 puntas de raspado, 1 punta periodontal, 1 punta y 5 limas para endodencia)
Aspirador (1 ud.)	
Cabezal de succión desechable (1 set de 25 piezas)	
Fresas (1 set; 5 cónicas con hendidura + 5 esféricas)	
Cabezal de pulir desechable (1 set de 10 piezas)	

ESCANÉAME PARA PEDIR
TU PRESUPUESTO >>>

