


Aesculap® Clips de Ligadura DS

Pinza de extracción para clips DS

- Pinza para remover clips, para uso en cirugía abierta o laparoscópica
- Instrumento individual que puede ser provisto bajo solicitud
- Puede ser usada para clips con y sin pestillo

Pinça de extração para DS-Clips

- Pinça de extração de clips, para utilização em cirurgia aberta ou laparoscópica
- Instrumento individual que pode ser fornecido mediante solicitação
- Pode ser utilizado para aplicação de clips comuns ou com trinco

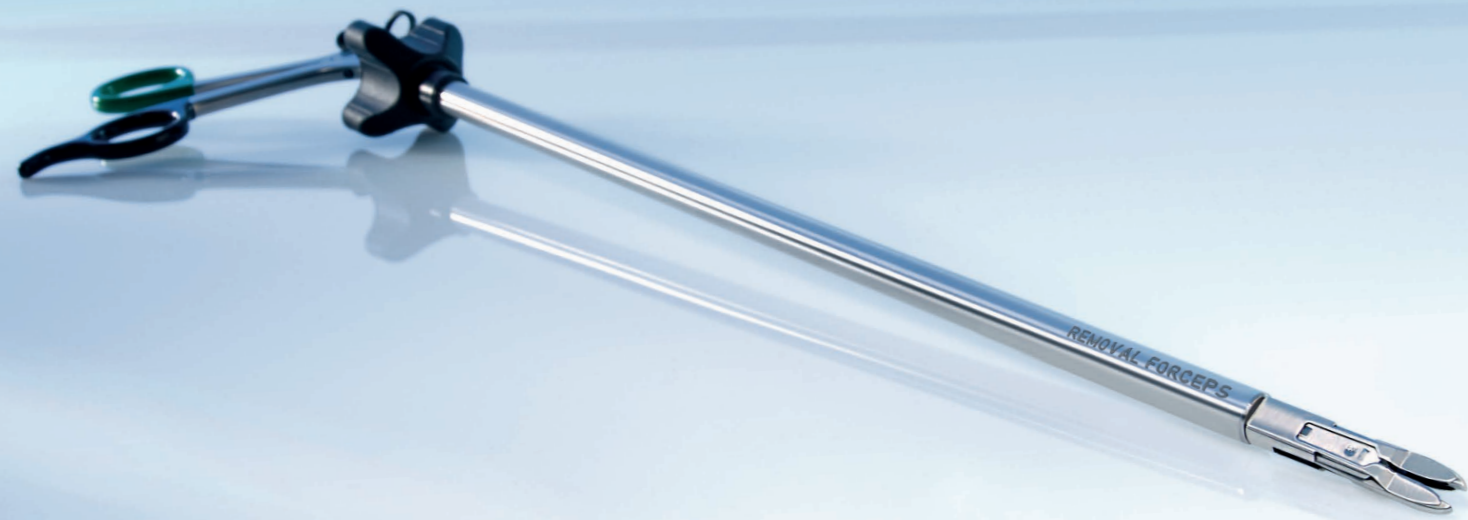

Aesculap Endoscopic
Technology


Aesculap® Clips de Ligadura DS®

INNOVADORES, FIABLES, CÓMODOS

B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)
Servicio Atención Clientes | Teléfono 902 47 47 01
atencioncliente.vetcare@bbraun.com | www.bbraun-vetcare.es

Sujeto a modificaciones técnicas. Todos los derechos reservados. Este folleto sólo puede utilizarse con el propósito exclusivo de obtener información sobre nuestros productos. No está permitida la reproducción parcial ni de ningún otro modo.

Aesculap® Clips de Ligadura DS

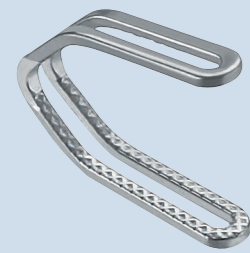

Clip DS (Doble vástago)
Clipe DS (Haste dupla)

Clip con Doble Vástago

- El Clip DS consiste en una nueva forma de clip con barras paralelas, anguladas y con un espacio en el medio, dentro del cual se comprime el tejido. Como resultado, el clip se estabiliza y evita un desplazamiento axial.
- El Clip DS ofrece un cierre optimizado desde la parte distal.
- El perfil interno diamantado resulta en una gran superficie de contacto con el tejido.
- El Clip DS es fabricado con titanio, material probado para el uso humano.

Clipe com Haste Dupla

- O DS-Clip consiste numa forma de clipe com barras paralelas, anguladas e com um espaço entre si no qual se comprime o tecido. Estas barras conferem estabilidade ao clipe, evitando o seu deslocamento axial.
- O clipe proporciona um fecho optimizado que se inicia na sua zona distal.
- O perfil interno em forma de diamante resulta numa acrescida superfície de contacto com o tecido.
- O clipe é fabricado em Titânio.



Pinza aplicadora endoscópica de clips, longitud 310 mm / Aplicador de cliques endoscópico, comprimento 310 mm




Tamaño / Tamanho	Codif. Color / Codificação de cor	Vástago Ø / Haste Ø	Nro. artículo / N° do artigo
Small		5 mm	PL801R
Small-Medium		5 mm	PL802R
Medium		10 mm	PL806R
Medium-Large Medium-Large (z)		10 mm	PL807R
Large Large (z)		12 mm	PL808R

Pinza endoscópica p. extracción de clips, longitud 310 mm / Pinça endoscópica para extração de cliques, comprimento 310 mm



Tamaño / Tamanho	Codif. Color / Codificação de cor	Vástago Ø / Haste Ø	Nro. artículo / N° do artigo
Medium		10 mm	PL816R
Medium-Large Medium-Large (z)		10 mm	PL817R
Large Large (z)		12 mm	PL818R


Pinza aplicadora de clips para cirugía abierta / Aplicador de cliques para cirurgia aberta

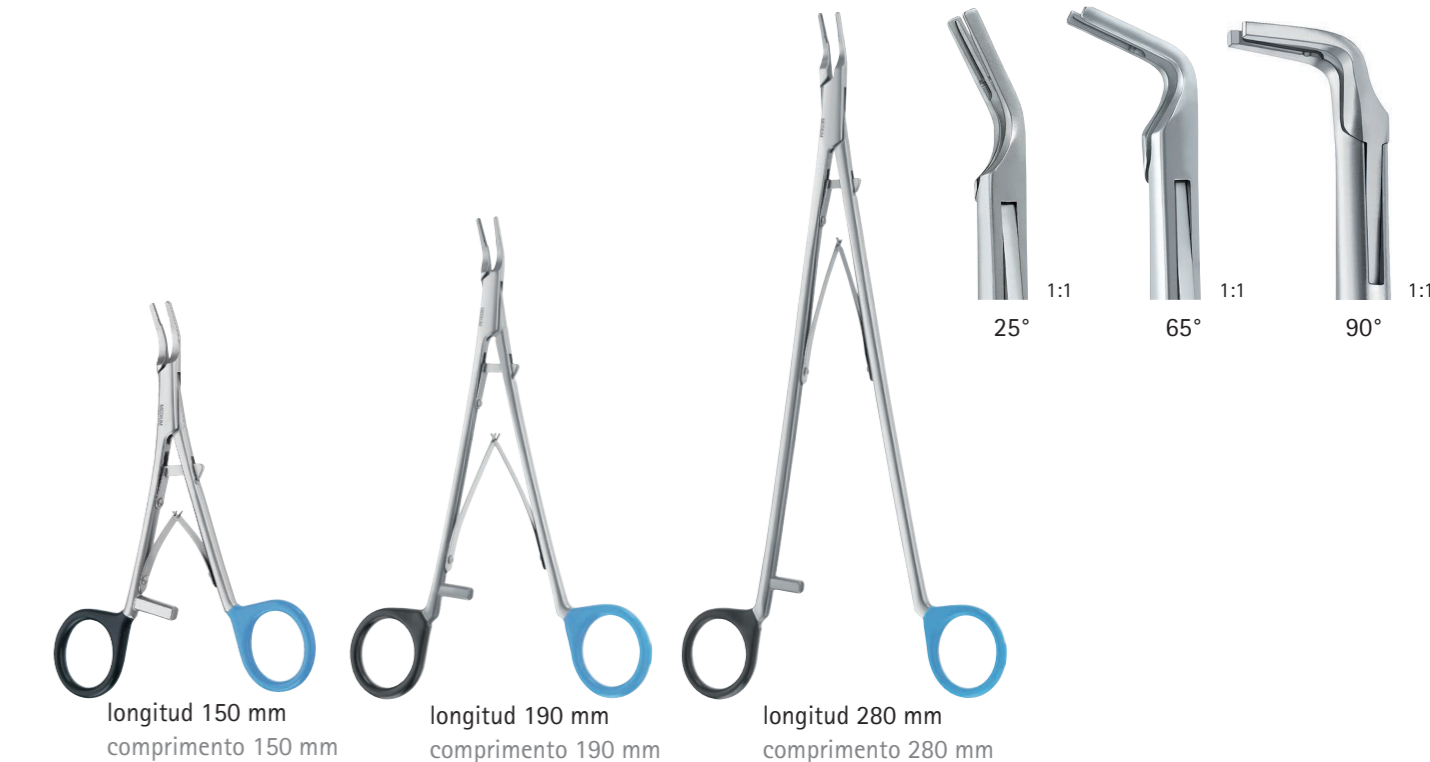


Tamaño / Tamanho	Codif. color / Codificação de cor	150 mm / 25°	190 mm / 25°	190 mm / 65°	190 mm / 90°	280 mm / 25°	280 mm / 65°	280 mm / 90°
Small		FC171R	FC174R	FC175R	-	FC177R	FC178R	FC179R
Small-Medium		FC181R	FC184R	FC185R	-	FC187R	FC188R	-
Medium		FC191R	FC194R	FC195R	FC196R	FC197R	FC198R	FC199R
Medium-Large Medium-Large (z)		-	FC204R	FC205R	FC206R	FC207R	FC208R	FC209R
Large Large (z)		-	FC214R	FC215R	FC216R	FC217R	FC218R	FC219R

Información para pedidos

Clip de Ligadura DS de titanio sin pestillo
DS-Clip em Liga de Titânio sem trinco

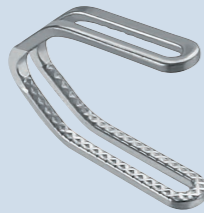

Clip de Ligadura DS de titanio con pestillo (z)
DS-Clip em Liga de Titânio com trinco

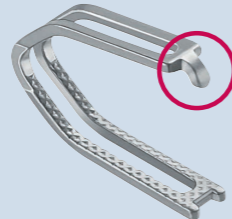

Tamaño / Tamanho	Codificación de color / Codificação de cor	Imagen 1:1	Imagen 1:1	caja de / Caixa com
Small		 4,1 mm / 3,6 mm	PL450SU	15 cartuchos con 6 clips 15 cartuchos com 6 cliques
			PL452SU (Multipack)	6 cartuchos con 24 clips 6 cartuchos com 24 cliques
Small-Medium		 5,0 mm / 4,8 mm	PL453SU	15 cartuchos con 6 clips 15 cartuchos com 6 cliques
Medium		 6,2 mm / 5,8 mm	PL459SU	15 cartuchos con 6 clips 15 cartuchos com 6 cliques
Medium-Large Medium-Large (z)		 7,8 mm / 8,9 mm	PL462SU	15 cartuchos con 6 clips 15 cartuchos com 6 cliques
		 7,8 mm / 9,4 mm	PL465SU	
Large Large (z)		 10,3 mm / 12 mm	PL468SU	12 cartuchos con 6 clips 12 cartuchos com 6 cliques
		 10,3 mm / 12,6 mm	PL471SU	



Innovador, fiable, cómodo

Innovador: El sistema es innovador y único en el segmento de Clips de Ligadura de Titanio.

Fiable: El Clip DS proporciona un agarre firme en la estructura clipeada.

Cómodo: El sistema es fácil de usar. No requiere ninguna adaptación especial del procedimiento quirúrgico.

Innovadores, fiables, cómodos

Innovador: Este sistema es único e innovador na gama de cliques em Liga de Titânio.

Confiável: O DS-Clip proporciona uma colocação firme do clipe nas estruturas.

Cómodo: O sistema é fácil de utilizar. Não requer qualquer adaptação ao procedimento cirúrgico.



Aesculap® Clips de Ligadura DS

Clip DS con pestillo (z)


El pestillo en la punta distal del clip previene adicionalmente el deslizamiento del tejido.

DS-Clip com trinco

O trinco na ponta distal do clipe evita o deslizamento de tecido.



Comportamiento de cierre del clip
Comportamento do fecho do clipe

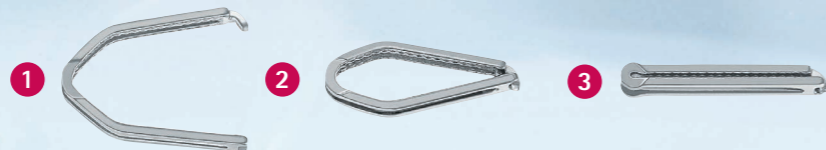

Instrumentos

- Los aplicadores del Clip DS son disponibles para cirugía laparoscópica y abierta
- Los aplicadores del Clip DS, cuentan con un cierre integrado que posibilita la aplicación con fuerza mínima, evitando el uso de fuerza excesiva
- El aplicador laparoscópico viene con un canal de irrigación para la limpieza rápida y segura
- Vástago con rotación de 360° para la alineación correcta del Clip DS
- Calidad reconocida y comprobada de Aesculap

Cartuchos de Clips

- Retirada simple del clip
- Fácil identificación de cartuchos vacíos a través de aletas sobresalientes
- Cartucho con diseño ergonómico para manejo fácil
- Formato en cartuchos de 6 clips
- Suministro en cajas dispensadoras que pueden ser almacenadas en el quirófano
- En empaque estéril

Instrumentos

- Aplicadores disponíveis para cirurgia aberta e laparoscópica.
- Os aplicadores de cliques são fabricados com um calço integrado que possibilita a aplicação de uma força mínima e ao mesmo tempo evita o uso de força excessiva
- Aplicador laparoscópico com canal de irrigação para limpeza rápida e segura
- Haste com rotação de 360° para o alinhamento correto do clipe
- Qualidade reconhecida e comprovada de Aesculap

Cartuchos de Clips

- Remoção simples do clip
- Fácil identificação de cartuchos vazios através das abas salientes
- Cartuchos ergonômicos de fácil manuseamento
- Apresentação em caixas de 6 cliques
- Fornecimento em caixas dispensadoras que podem ser armazenadas no bloco operatório
- Embalagem esterilizada de cliques