



## Cirugía sin sangrado

Equipos e instrumental para cortar,  
coagular y sellar de forma segura.

# Cirugía sin sangrado



SPITZ-700-340-800

## Unidad de electrocirugía VetCare

- ✓ Unidad de electrocirugía para la realización de procedimientos quirúrgicos con instrumental bipolar y monopolar.
- ✓ El software ha estado específicamente diseñado para realizar procedimientos de cirugía veterinaria.
- ✓ Detecta y reconoce de forma automática el instrumento conectado.
- ✓ Permite establecer y guardar modos predeterminados de trabajo.
- ✓ Pantalla táctil con una interfaz intuitiva para facilitar la interacción y el uso del equipo.
- ✓ Control mediante botonera o pedal.


Modo bipolar y monopolar

Control mediante pedal o botonera de mano

Ajuste automático de la potencia



Interfaz fácil e intuitiva

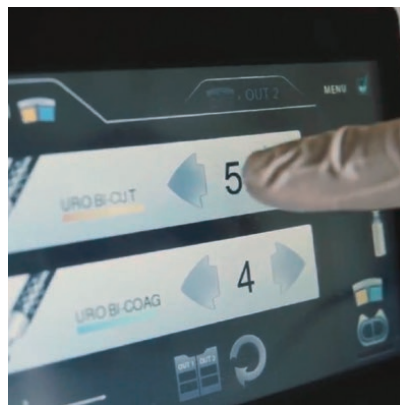

Pantalla táctil de 7"



Detección automática del instrumental

## Modos de uso

### Corte | Max 200 W

- Corte monopolar pure
- Corte monopolar con hemostasis

### Coagulación | Max 120 W

- Coagulación monopolar soft
- Coagulación monopolar forced
- Coagulación bipolar soft AutoStart

El modo Coagulación bipolar soft **AutoStart** cuenta con una función de activación automática de la corriente. Cuando el equipo detecta que se ha agarrado tejido con las puntas de las pinzas bipolares se activa la coagulación. El modo SOFT BI-COAG se detiene cuando se abren las puntas de las pinzas o después de 30 segundos de actividad.

# Instrumental monopolar VetCare

Mangos para el electrobisturí monopolar

## Mango monopolar botonera VetCare 4 mm

SPITZ-700-223-140 (cable 5 m)



## Mango monopolar botonera VetCare 2,4 mm

SPITZ-700-223-124 (cable 5 m)



# Electrodos neutros VetCare



Conexión VetCare  
(4,5 m)



SPITZ-700-700-003  
(160 x 80 mm)




SPITZ-700-700-005  
(260 x 150 mm)

# Instrumental monopolar Aesculap®

## Electrodos de trabajo corto

Código	Diámetro conexión	Longitud / diámetro	Imagen
GK110R	4.0 mm	L: 20 mm	
GK140R	2.4 mm	L: 20 mm	
GK112R	4.0 mm	L: 25 mm	
GK114R	4.0 mm	L: 18 mm / D: 1 mm	
GK144R	2.4 mm	L: 18 mm / D: 1 mm	
GK115R	4.0 mm	D: 5 mm	
GK116R	4.0 mm	D: 10 mm	
GK121R	4.0 mm	D: 4.0 mm	

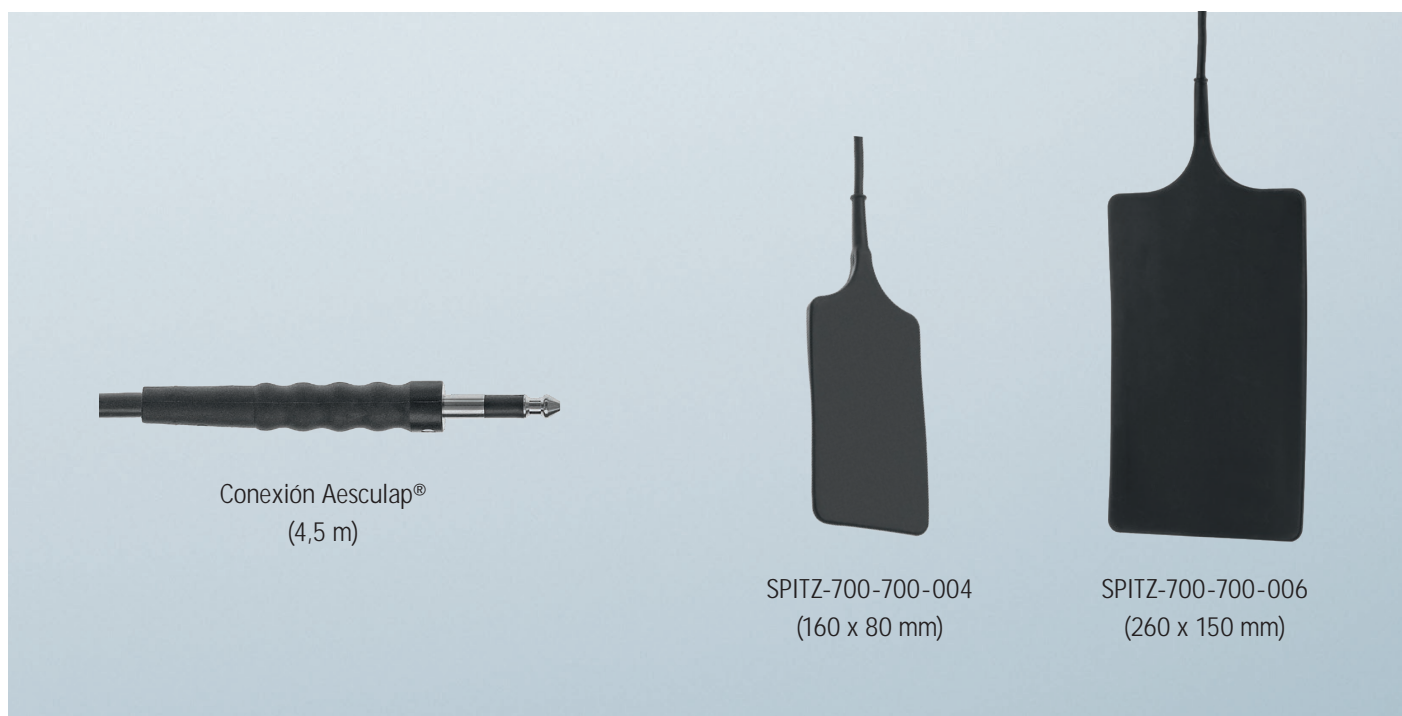



## Electrodos neutros VetCare





# Instrumental bipolar VetCare

## Pinzas, tijeras y fórceps/tijera



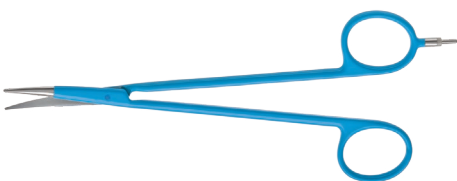
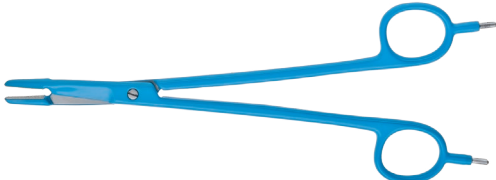
Código	Punta	Longitud	Imagen
SPITZ-700-010-150	0,3 mm	150 mm	
SPITZ-700-030-150	1,0 mm	150 mm	
SPITZ-120-742-175	Mandíbula curva, fina y delgada	175 mm	
SPITZ-700-120-190	Mandíbula curva y dentada	140 mm	

## Clamp quirúrgico

Clamp bipolar para el sellado permanente de vasos y estructuras tisulares.

La seguridad del cierre es comparable a los resultados obtenidos con el uso de otros métodos mecánicos.



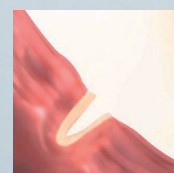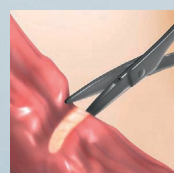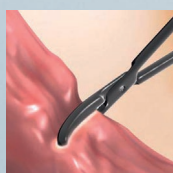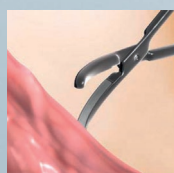

Longitud de trabajo: 230 mm.



# Instrumental bipolar Aesculap®



## Pinzas

Las pinzas de coagulación bipolar con punta Sintram reducen la adherencia del tejido coagulado.




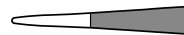

Código	Punta	Longitud	Imagen
GK646R	 1,0 x 6 mm	200 mm	
GK624R	 0,9 x 23 mm	160 mm	

### Ⓜ AEscULAP® | Conector plano

Las pinzas de coagulación Caspar tienen una forma fina que permite la realización de procedimientos delicados. Las puntas disponen de superficies redondeadas y pulidas que disminuyen la adherencia de los tejidos. Además, la guía paralela garantiza el encuentro exacto de las puntas.

Código	Punta	Longitud	Imagen
GK920R	 2,0 mm	165 mm	









### Ⓜ AEscULAP® | Conector plano

Código	Punta	Longitud	Imagen
GK700R	 0,6 mm	160 mm	
GK701R	 0,9 mm	160 mm	
GK711R	 0,9 mm	160 mm	

### Ⓜ AEscULAP® | Conector plano | GK700R | GK701R | GK711R







# Instrumental bipolar Aesculap®

## Pinzas y tijeras

Código	Punta	Longitud	Imagen
GK881R	 3,0 mm	160 mm	
GK882R	 3,0 mm	200 mm	
GK883R	 3,0 mm	230 mm	
GK886R	 3,0 mm	200 mm	

### Ⓜ AESCULAP® | Conector plano

Las tijeras BipoJet están compuestas de acero de grado médico y cerámica que confiere un mayor grado de resistencia al desgaste y una vida útil más larga.

Código	Punta	Longitud	Imagen
BC693R	 Estándar	160 mm	
BC685R	 3,0 mm	180 mm	
BC686R	 3,0 mm	180 mm	



## Cables y accesorios

Monopolar		
Código	Descripción	Unidad de venta
SPITZ-700-223-140	Mango monopolar VetCare d: 2,4 mm y l: 3 m	1
SPITZ-700-223-124	Mango monopolar VetCare d: 4,0 mm y l: 3 m	1
SPITZ-700-501-500	Cable monopolar VetCare d: 4,0 mm y l: 5 m	1
SPITZ-700-500-900	Adaptador para utilizar mangos monopolares Aesculap® en la unidad VetCare – Mangos GN230, GN231 y GN232	1
GN230	Mango monopolar Aesculap® d: 4,0 mm y l: 4,5 m	1
GN231	Mango monopolar Aesculap® d: 4,0 mm y l: 4,5 m	1
GN232	Mango monopolar Aesculap® d: 2,4 mm y l: 4,5 m	1

Bipolar		
Código	Descripción	Unidad de venta
SPITZ-700-500-500	Cable bipolar VetCare 5 m para pinzas SPITZ-700-010-150 y SPITZ-700-030-150	1
SPITZ-700-500-305	Cable bipolar VetCare para tijeras SPITZ-120-742-175	1
SPITZ-700-500-302	Cable bipolar VerCare para tijera/fórceps SPITZ-700-120-190 y clamp SPITZ-700-730-230	1
SPITZ-700-500-910	Adaptador para utilizar instrumental bipolar Aesculap® en la unidad VetCare – Cables GN085 y GN133	1
GN085	Cable bipolar Aesculap® para tijeras	1
GN133	Cable bipolar Aesculap® para pinzas	1

Accesorios		
Código	Descripción	Unidad de venta
SPITZ-700-350-405	Pedal unidad electrocirugía VetCare	1
GK299	Cepillo de alambre para limpieza de instrumental	1




Caiman®


Cirugía sin sangrado en al clínica diaria.

En este espacio encontraras videotécnicas para utilizar el **Caiman®** en los procedimientos quirúrgicos más comunes en la clínica diaria.

Núria Vizcaino muestra paso a paso como realizar la técnica quirúrgica y también los beneficios del uso del **Caiman®** en cada procedimiento.

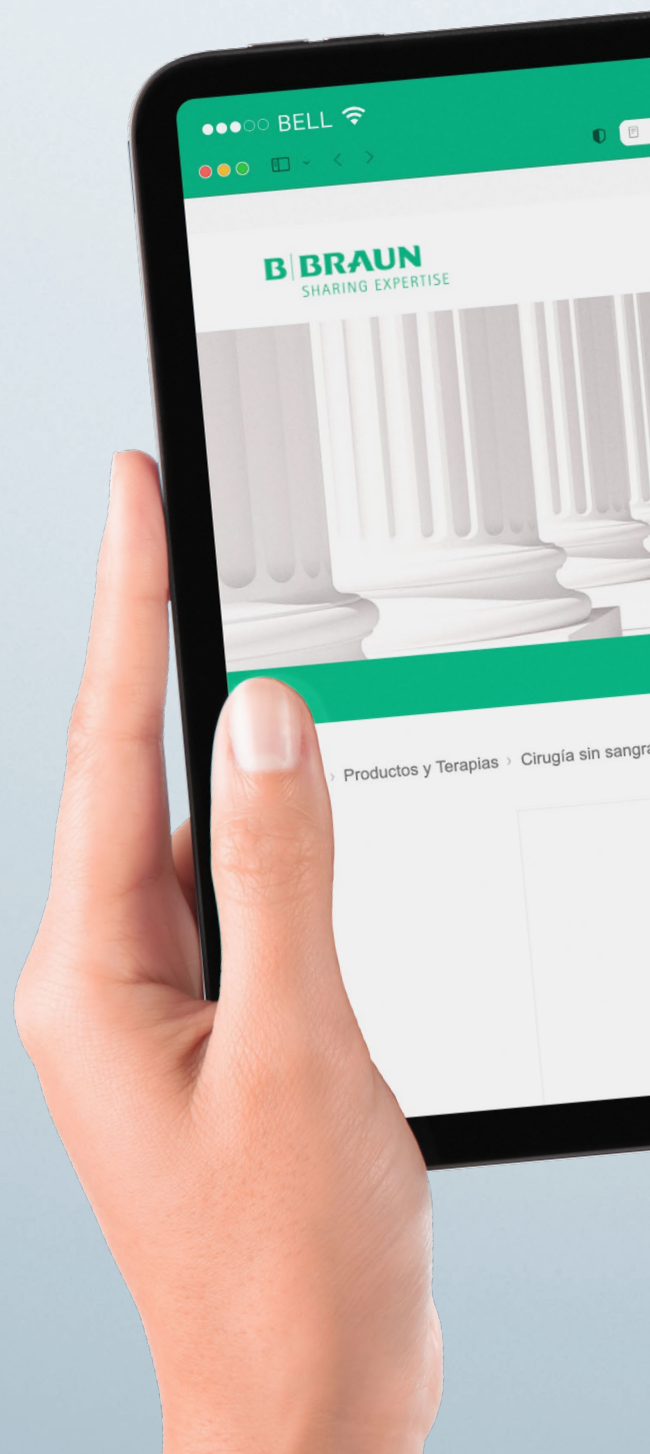

ACCEDE ESCANEÁNDOME >>

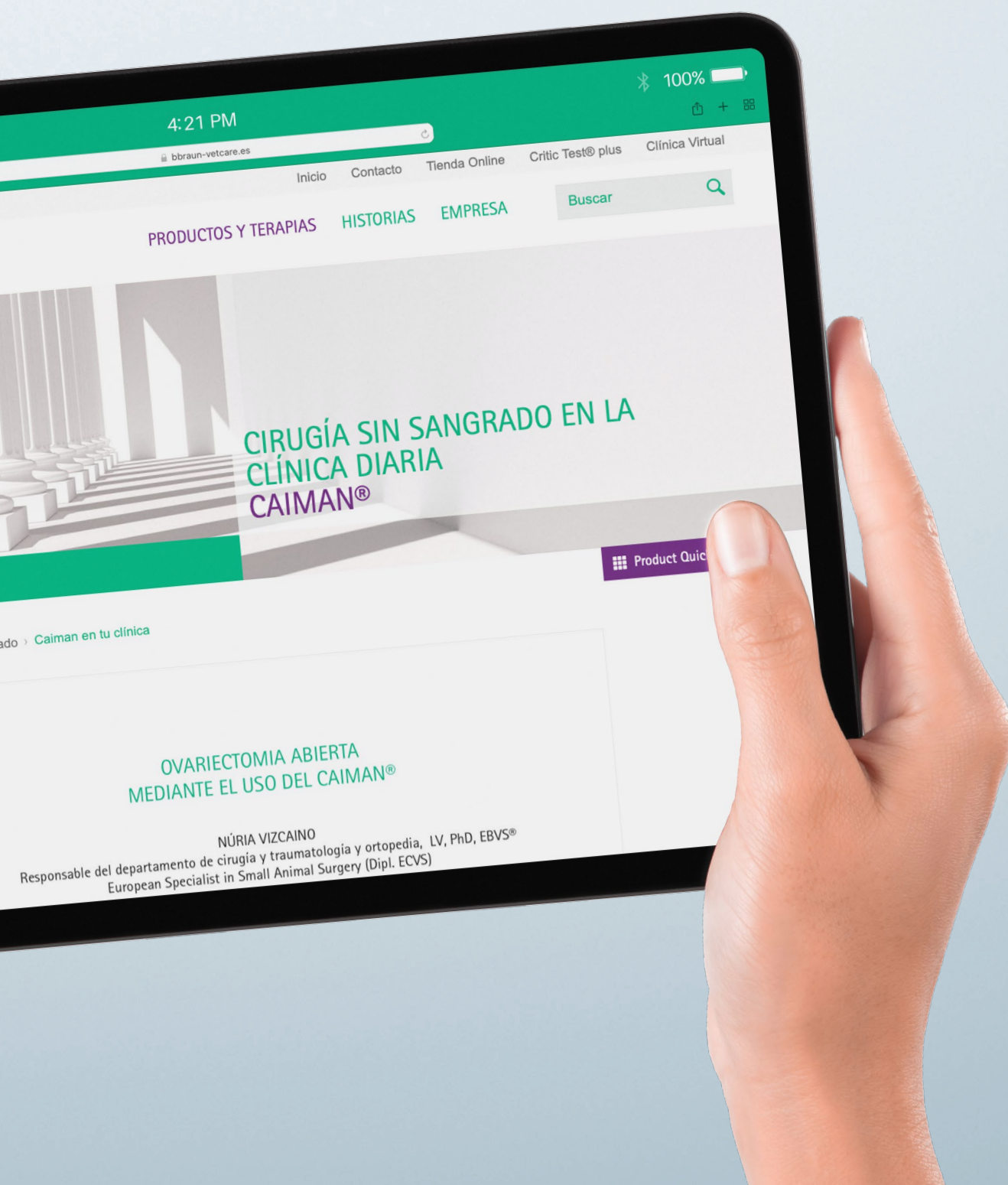

B. Braun VetCare, S.A.U. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)  
Servicio Atención Clientes | Tel. +34 935 86 62 00 | Fax 902 48 48 01  
atencioncliente.vetcare@bbraun.com | www.bbraun-vetcare.es

