




## Compact<sup>Plus</sup>

La seguridad y la precisión se reúnen  
en esta nueva bomba

# Infusomat® y Perfusor Compact Plus

## Seguridad y precisión

La solución ideal para los tratamientos en los que la **facilidad** y la **agilidad** en el manejo se combinan con la **máxima precisión** en un entorno de terapia de **infusión segura**.

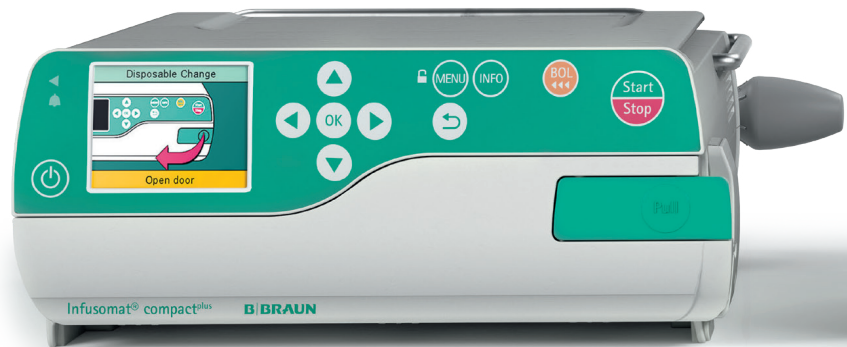

RÁPIDO APRENDIZAJE



INICIO ÁGIL



ALTA PRECISIÓN



BATERÍA LI-ION

## Infusomat® Compact Plus



**Clamp anti flujo-libre**  
Cierre automático de la línea para la prevención de cualquier riesgo de infusión incontrolada en, o durante la apertura de la puerta.

**Infusomat® plus Line**  
Sencillez en la colocación del equipo gracias a su diseño y al código de colores utilizado. Los materiales utilizados permiten una infusión precisa y continua de forma prolongada (96 h).





AIR STOP

**AirStop**  
Paro automático de la infusión en el vaciado de la cámara gracias a la membrana hidrofílica situada en la misma. Reducción de la manipulación del AV y el riesgo de infección del paciente.



PRIME STOP

**PrimeStop**  
Paro automático del cebado por gravedad sin goteo de fluido gracias a la membrana hidrofóbica de la que consta el tapón protector. Protección ante posibles contaminaciones.

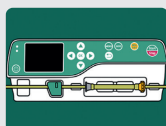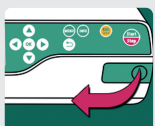

NT  
NUTRICIÓN  
ENTERAL / PARENTAL

INFUSOMAT<sup>PLUS</sup>  
SAFESET

R  
G  
B  
PANTALLA  
A COLOR

GUÍAS  
DE PROCESO

MANEJO  
INTUITIVO



PANTALLA A COLOR




GUÍAS DE PROCESO



MANEJO INTUITIVO



B. BRAUN DOSEGUARD™

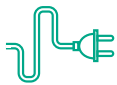

TRANSFORMADOR INTEGRADO



ASA INTEGRADA




DISEÑO ROBUSTO



PROTECCIÓN IP34

## Perfusor® Compact Plus

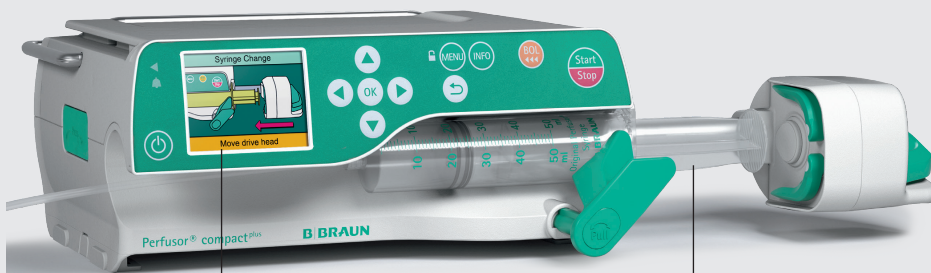


**Flexibilidad**  
Sistema modular para un transporte sencillo.

### Interfaz gráfico

Su operativa intuitiva y guiada por pantalla reduce el tiempo de aprendizaje.

### Colocación de la jeringa

Colocación sencilla e inicio rápido y seguro gracias al brazo semi-automático.

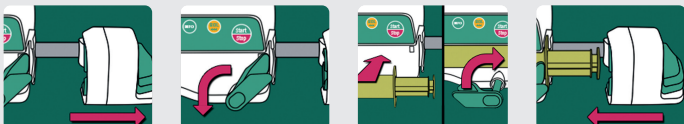

PANTALLA A COLOR



GUÍAS DE PROCESO



MANEJO INTUITIVO

# Líneas Infusomat® Plus

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
8717050	Infusomat® compact plus
8717030	Perfusor® compact plus
8717110	Cable de alimentación 2,5m cp
8700200	Infusomat plus line safeset IV estándar
8700210	Infusomat plus line safeset IV estándar 300cm
8700220	Infusomat plus line safeset pur estándar 250cm
8700240	Infusomat line needle free safeset 300
8700250	Infusomat plus line safeset pur n. free y-port
8700260	Infusomat plus line safeset pur uv protect
8700270	Infusomat plus line safeset uv protect n.f. y-port
8700280	Infusomat plus line safeset pur, flushing set
8700300	Infusomat plus line safeset pur uv protect 0,2u, 250
8700350	Infusomat plus line trasfusión 250cm
8700360	Infusomat plus line typ transf. n.f. y-port
8700370	Infusomat plus line, en, m. spike (ENFit)
8700380	Infusomat plus line enteral w.1000ml nutr.bag
8700400	Infusomat plus pvc enteral e. spike ( ENFit)
8728844F-06	Jeringa original perfusor 50ml transparente
8722960	Lineas Perfusor standard
8700340	Infusomat Plus Line needle-based Y-port PVC
8700330	Infusomat Plus Line needle free 300cm
8700320	Infusomat plus line IV-standard PUR 250cm
8700310	Infusomat plus line IV-standard PVC 250cm

B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)  
Tel. 93 565 61 65 | [atencioncliente.vetcare@bbraun.com](mailto:atencioncliente.vetcare@bbraun.com) | [www.bbraun-vetcare.es](http://www.bbraun-vetcare.es)  
B. Braun VetCare, S.A. - a B. Braun company

